


Link do produktu: <https://konwbutach.com.pl/buty-easyboots-rx2-1-sztuka-p-83.html>

Buty EasyBoots Rx2 - 1 sztuka



Cena brutto	410,00 zł
Cena netto	333,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	SB-EBRX-xx
Kod producenta	SB-EBRX-xx

Opis produktu

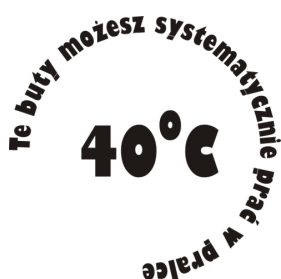

Easyboot Rx2 - lekki but terapeutyczny - 1 szt.

Easyboot Rx2 to solidny, a jednocześnie lekki but terapeutyczny przeznaczony do stosowania w stajni, podczas transportu oraz w okresie rehabilitacji. Został zaprojektowany z myślą o koniach z wrażliwymi kopytami, cienką podszewą, ochwatem, founder i innymi przewlekłymi problemami kulawizny.

But posiada zintegrowaną podszewę RE (mieszanka gumy i EVA), dzięki której kopyto pozostaje blisko podłoża. Rockerowana (zaokrąglona) spódniczka zapewnia wbudowaną mechanikę odrywania, a gumową podszewę można w razie potrzeby modyfikować pod konkretne potrzeby konia.

Dla jakich koni sprawdzi się najlepiej?

- Konie z ochwatem, cienką podszewą, founder
- Konie z przewlekłą kulawizną i problemami dolnej części kończyny
- Konie stojące na twardym podłożu (stajnia, transport)
- Konie w okresie rehabilitacji i lekkiego wybiegu
- Miniatury i kuce (najmniejsze rozmiary od 70 mm szerokości)

Najważniejsze zalety:

- Zintegrowana podszewka RE – stabilne wsparcie przy niskiej wadze buta
- Rockerowana podszewka – ułatwia odrywanie i wspiera naturalną mechanikę kopyta
- Możliwość modyfikacji gumowej podszewy
- Szerokie otwarcie i pasek ułatwiający zakładanie
- Wyściełana, dobrze przylegająca cholewka – chroni okolice nadpiętki i ogranicza wnikania brudu
- Oddychający i wytrzymały materiał
- Lekka konstrukcja – jeden z lżejszych butów terapeutycznych

Kiedy wybrać Easyboot Rx2 zamiast Easyboot Cloud?

Sytuacja / potrzeba	Lepszy wybór	Dlaczego



Potrzeba bardziej rockerowanej podeszwy	Rx2	Ma wbudowaną mechanikę odrywania (roller)
Chcesz, aby kopyto było bliżej podłoża	Rx2	Zintegrowana podeszwa RE bez klinu
Zależy Ci na najlżejszym bucie terapeutycznym	Rx2	Lżejszy od Cloud
Małe kopyta / kuce / miniatury	Rx2	Rozmiary zaczynają się już od 70 mm szerokości
Potrzeba możliwości modyfikacji podeszwy	Rx2	Gumowa podeszwa daje się kształtować
Potrzeba klina (heel lift / 2° wedge)	Cloud	Cloud ma wymienną wkładkę z klinem 2°
Maksymalne miękkie wsparcie i amortyzacja	Cloud	Wkładka EVA jest wyraźnie bardziej miękka
Bardzo duże kopyta	Cloud	Cloud ma większy zakres rozmiarów

Podsumowanie:

Wybierz **Rx2**, gdy zależy Ci na lekkim bucie, który trzyma kopyto nisko, ma rockerowaną podeszwę i możliwość jej modyfikacji.

Wybierz **Cloud**, gdy koń potrzebuje większej amortyzacji i klina podnoszącego piętę.

Zalecenia stosowania:

- But przeznaczony **wyłącznie do użytku terapeutycznego** (stajnia, transport, lekki wybieg).
- **Nie jest przeznaczony do jazdy ani intensywnego ruchu.**
- Idealny przy długim staniu na twardym podłożu oraz w okresie rehabilitacji.
- W razie potrzeby można dodać dodatkową wkładkę Comfort Pad.
- Decyzję o zastosowaniu i ewentualnych modyfikacjach najlepiej podejmować wspólnie z farrierem lub lekarzem weterynarii.

Jak dobrać rozmiar Easyboot Rx2?

Pomiary wykonuj na świeżo obciążonym kopycie.

1. Zmierz **szerokość** w najszerszym miejscu kopyta.
2. Zmierz **długość** od linii pięt (buttress line) do przodu kopyta (bez opuszek).

Tabela rozmiarów Easyboot Rx2

Rozmiar	Szerokość (mm)	Długość (mm)
000	70-80	80-90
00	80-90	90-100
0	90-100	100-110
1	100-110	110-120
2	110-120	120-130
3	120-130	130-140
4	130-140	140-150
5	140-150	150-160
6	150-160	160-170
7	160-170	170-180



Wskazówki:

- Idealnie, gdy szerokość i długość mieszczą się w tym samym rozmiarze.
- Jeśli pomiary wskazują różne rozmiary – wybierz większy.
- Jeśli różnica między szerokością a długością przekracza jeden rozmiar – ten model może nie być optymalny.
- Buty sprzedawane są na sztuki.

W razie wątpliwości prześlij nam zdjęcia kopyt (od spodu i z boku) wraz z pomiarami – chętnie pomożemy dobrać odpowiedni rozmiar.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 0 , 00 , 000 , 1 , 2 , 3 , 4 (+ 67,00 zł) , 5 (+ 67,00 zł) , 6 (+ 67,00 zł) , 7 (+ 67,00 zł)

Wkładka - wybierz: bez wkładki , filc techniczny - 10mm - miękki (+ 12,30 zł) , filc techniczny - 6mm - bardzo miękki (+ 12,30 zł) , wełna naturalna - 4mm (+ 30,00 zł) , wełna naturalna - 6mm (+ 30,00 zł) , wełna naturalna - wykonanie specjalne - wycięcie według rysunku (+ 55,00 zł)

Jak prawidłowo mierzyć kopyta

Wykonywanie pomiarów

Prawidłowy pomiar kopyt konia jest jednym z najważniejszych kroków, które należy podjąć, aby uzyskać dobre dopasowanie i optymalną wydajność. Z pewnością nikt z nas nie biegałby w butach za dużych lub za małych, więc nie oczekuj, że zrobią to nasze konie !!


Poniżej wyjaśniamy krok po kroku, jak wykonać wymagane pomiary:

Pamiętaj, że aby dokonać prawidłowego pomiaru, musisz to zrobić na kopycie niepodkutym i po jego ostatnim naturalnym cięciu. Kopyto powinno mieć co najmniej wyważone pięty i dobre mustang roll.

Do prawidłowego pomiaru potrzebujesz tylko sztywnej taśmy mierniczej, która mierzy w mm i czyste kopyto.

Referencje do wykonania pomiarów

Odnośniki, które należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu prawidłowych pomiarów kopyt:

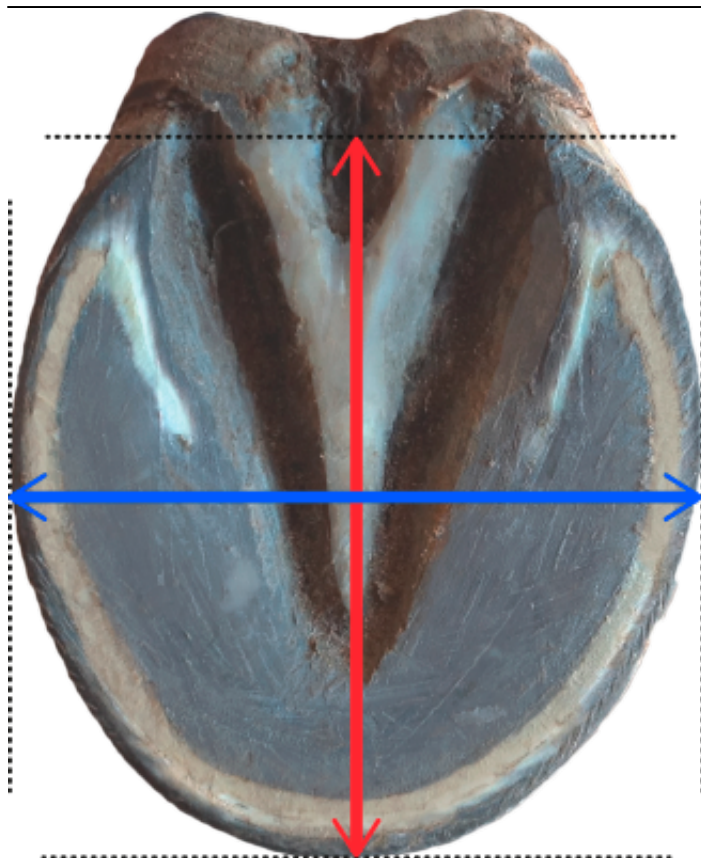

Szerokość:

niebieska linia (maksymalna szerokość kopyta).

Długość:


czerwona linia (odległość między podporą pięty a palcem).

Pomiar szerokości kopyt

Aby dokonać prawidłowego pomiaru, zmierz kopyto w najszerszym miejscu.

Pamiętaj, że maksymalna szerokość nie zawsze będzie w tym samym miejscu we wszystkich kopytach, ponieważ zależy to od konkretnego kształtu kopyt.

Pamiętaj, aby umieścić taśmę mierniczą tak prosto, jak to możliwe, z jednej strony na drugą, ponieważ ukośne położenie taśmy spowoduje nieprawidłowe pomiary.

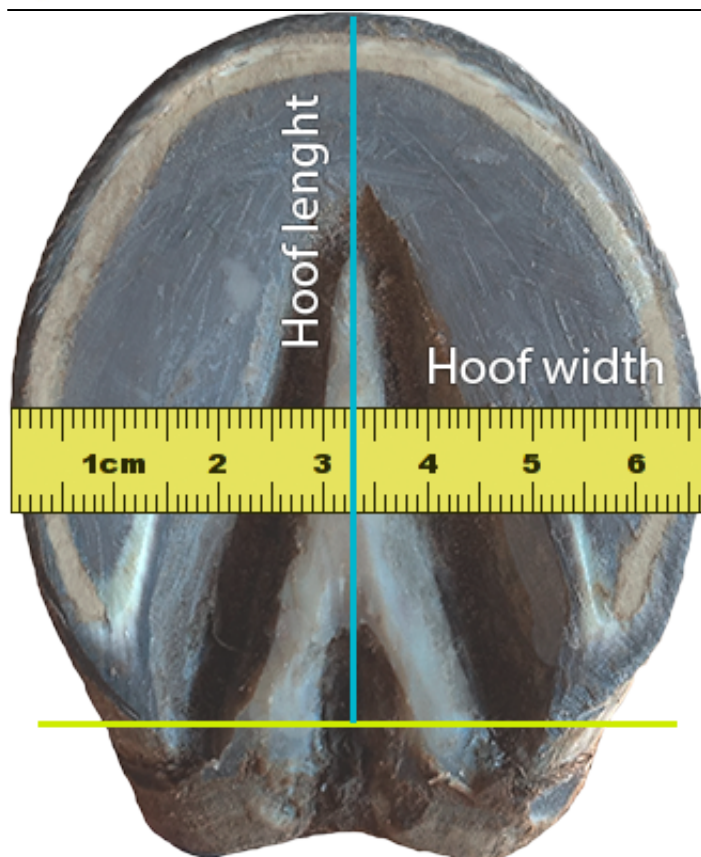


Pomiar długości kopyt

Jest to pomiar od czubka pazura do końca kątów wsporowych. Aby poprawnie wykonać ten pomiar, należy zlokalizować oba kąty wsporowe, czyli tam, gdzie kończy się ściana kopyta, narysować między nimi wyimaginowaną linię prostą i wykonać pomiar od tej linii do czubka kopyta przechodzącego przez środek strzałki.

Pamiętaj, że długość kopyt nie obejmuje piątek, ponieważ będą one zawarte w pięcie buta, a nie w podeszwie.

Używanie prostej linijki lub tarnika do zaznaczenia linii łączącej obie przypory pięty może pomóc w pomiarze długości kopyt.

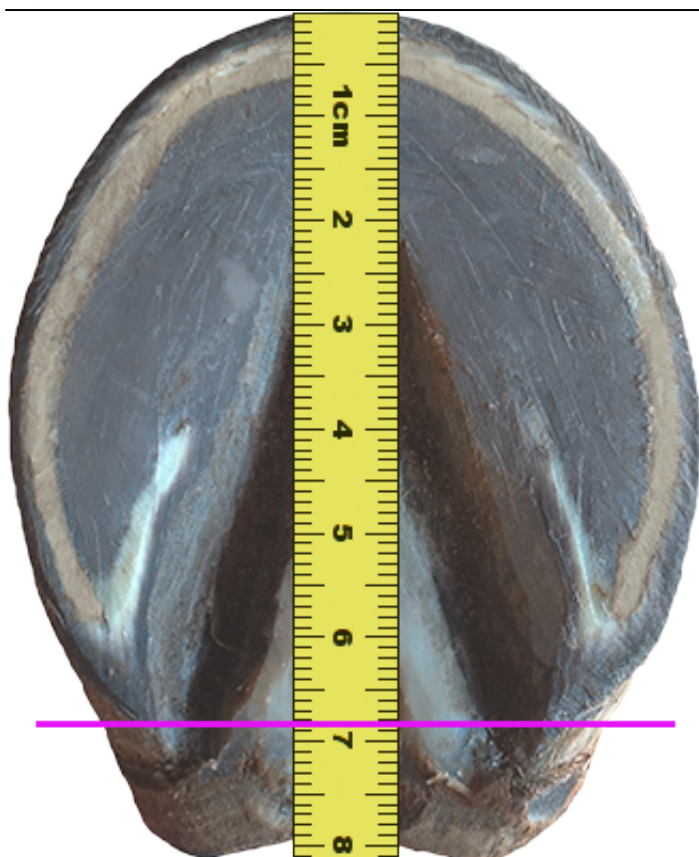

Przypadki specjalne; kopyta z nierównoważonymi piętami

Możliwe, że rysując linię między dwoma przyporami pięty, stwierdzisz, że linia ta nie jest prosta, ale ukośna, co oznacza, że pięty są nierównoważone. W takim przypadku również zmierz odległość od palca do najdalszej przypory pięty, ale wskazane jest skonsultowanie się z podiatrą, aby można było je odpowiednio zrównoważyć.

Warto pamiętać, że Easyboot Cloud, jako but o dużej tolerancji wymiarów, przeznaczony do celów rehabilitacyjnych, często będzie lepiej spełniał swoją rolę, jeśli nie będzie ściśle dopasowany; w przypadku gdy wymiary kopyta wskazują na granicę rozmiarów, należy wybrać rozmiar większy. Umożliwi to zastosowanie buta z indywidualnie dobranymi wkładkami, opatrunkiem itd.

Easyboot Rx - dopasowanie

Porównanie boutów Cloud i Rx2

Porównaj: Easyboot Cloud

vs Easyboot Rx2



Zarówno [Easyboot Rx2](#) , jak i [Easyboot Cloud](#) to fantastyczne opcje w naszej ofercie terapii. Niezależnie od tego, czy Twój koń aktywnie uczestniczy w zawodach, czy też jest na emeryturze, posiadanie sprawdzonego buta terapeutycznego jest pomocne dla wszystkich koni i właścicieli koni. Zastanawiasz się, który but będzie lepszy dla Twojego konia? Rozważ te podobieństwa i różnice.

Podobieństwa

Zarówno [Easyboot Cloud](#) , jak i [Easyboot Rx2](#) zapewniają amortyzację, wsparcie i ochronę kopyt. Te buty zapewniają komfort przy różnych kulawiznach, czy to z bólem stopy, cienką podeszwą, trzeszczką, założycielem czy częstymi ropniami. Obydwa buty są przydatne podczas ciągnięcia przyczepy, pomagając Twojemu koniowi amortyzować nierówności, zakręty i nieoczekiwane zatrzymania na przyczepie. Dodatkowo zapewniają komfort podczas stania lub stania przez dłuższy czas. Jeśli stoisz na zawodach na betonie, buty mogą pomóc w zapobieganiu bolesności kopyt i tworzeniu zapasów.

Różnice

Chociaż oba buty zapewnią wygodę i wsparcie w różnych sytuacjach, istnieje kilka cech, które je wyróżniają. Weź pod uwagę te różnice, próbując wybrać najlepszą opcję dla swojego konia.

1. Rozmiar

Buty Easyboot [Cloud](#) oferowane są w 10 rozmiarach: od najmniejszych o szerokości 89-99 mm do największych o szerokości 188-191 mm.

Easyboot Cloud - MM		
Size	Width in mm	Length in mm
00	89-99mm	102-112mm
0	98-108mm	112-118mm
1	108-124mm	118-131mm
2	124-133mm	131-137mm
3	133-149mm	137-150mm
4	149-159mm	150-159mm
5	159-170mm	159-170mm
6	170-177mm	170-177mm
7	177-188mm	177-188mm
8	188-191mm	188-201mm

Easyboot [Rx2](#) jest również oferowany w 10 rozmiarach. Najmniejszy ma szerokość 70-80 mm, a największy 160-170 mm.

Easyboot Rx2		
Size	Width in mm	Length in mm
000	70-80	80-90
00	80-90	90-100
0	90-100	100-110
1	100-110	110-120
2	110-120	120-130
3	120-130	130-140
4	130-140	140-150
5	140-150	150-160
6	150-160	160-170
7	160-170	170-180

Jeśli szukasz małego buta dla kucyka, Rx2 może być lepszą opcją. Jeśli szukasz dużego buta dla większych kopyt, Cloud może być dla Ciebie lepszą opcją. Jeśli znajdujesz się gdzieś pośrodku, może to nie być decydujący czynnik.

2. Projekt

Cloud jest wyposażony w [wygodną podkładkę EVA](#) z klinem o 2 stopniach. W razie potrzeby możesz wymienić tę podkładkę. Czy Twój koń potrzebuje klina do

uniesienia i wsparcia pięty? Jeśli tak, Easyboot Cloud jest dla Ciebie najlepszym wyborem.

Easyboot [Rx2](#) został zaprojektowany ze zintegrowaną podeszwą środkową RE (mieszanka gumy/EVA), utrzymując kopyto niżej przy podłożu. Nie jest wymagane dodatkowe wypełnienie. Podeszwa środkowa nie ma klina. Bez dodatkowego wypełnienia koń siedzi bliżej podłoża, a sam but jest lżejszy, co sprawia, że Rx2 jest naszym najlżejszym wyborem butów terapeutycznych.



3. Skala twardości

Czy chcesz, aby Twój koń miał bardziej miękką czy twardą podkładkę? [Podkładka EVA Cloud](#) jest o około 45% bardziej miękka niż podeszwa środkowa Rx2 w skali twardości Shore A. Jeśli Twój koń potrzebuje maksymalnego wsparcia przy chronicznej kulawiznie, Cloud może być lepszym wyborem.



4. Mechanika kopyt

Rx2 ma rockerowe dno, co może być korzystne w różnych sytuacjach terapeutycznych. Ponadto Rx2 można modyfikować [na](#) wiele sposobów, aby sprostać potrzebom różnych koni. Możesz stworzyć efekt wałka, usuwając krawędzie bieżnika za pomocą szczypiec.



5. Bieżnik

Wzór bieżnika Easyboot [Cloud](#) jest taki sam jak w modelach Easyboot Glove, Glue-On, Flip Flop, Back Country i Epic. Ten wzór bieżnika jest kompatybilny z naszym [systemem Therapy Click](#). System Therapy Click to pomoc terapeutyczna i punkt wyjścia do zmiany przejścia i uniesienia pięty. Zarówno podstawy 5-stopniowe, jak i 10-stopniowe zostały zaprojektowane z dodatkową głębokością, aby zapewnić profesjonalistom możliwość dostosowania do każdego unikalnego przypadku.



Pozycję breakover i wysokość pięty można szybko zmienić za pomocą tarki lub szlifierki. Dodaj dodatkową wysokość za pomocą produktów klejących. Zalecamy, aby [Therapy Click System](#) był używany TYLKO wtedy, gdy lekarz weterynarii doradzi w kwestii konkretnych potrzeb każdego indywidualnego przypadku.



Rx2 ma nowy wzór bieżnika z bardziej agresywnymi rowkami. Nie jest on kompatybilny z systemem Therapy Click.



6. System zamykania

Rx2 sięga wyżej w okolicy pęciny i jest wyściełany , aby zapobiec otarciom. Dopasowana cholewka pomaga zapobiegać przedostawaniu się wiórów i zanieczyszczeń do buta. Paski są elastyczne, aby pomóc rozciągnąć się i uzyskać ściśle dopasowanie.

[Zapięcie Cloud](#) nie sięga tak wysoko nad pęcinę. Paski nie są elastyczne, a powierzchnia rzepu jest większa w porównaniu do Rx2.

