

Link do produktu: <https://konwbutach.com.pl/easyboots-cloud-p-2.html>



EasyBoots Cloud

Cena brutto	465,00 zł
Cena netto	378,05 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	SB-EBC-xx
Kod producenta	SB-EBC-xx

Opis produktu

Easyboot Cloud - but terapeutyczny z wkładkami amortyzującymi - 1



sztuka

Easyboot Cloud to but terapeutyczny EasyCare, przeznaczony do odciążenia i amortyzacji kopyta. Sprawdza się przy ochwacie, cienkiej podeszwie, ropniu, ochwacie przewlekłym oraz przy ogólnym bólu kończyny i kopyta. Daje ulgę po intensywnej pracy, w transporcie oraz przy staniu na twardej posadzce.

W zestawie podstawowym jest wymienialna wkładka EVA Comfort Pad z klinem 2°, unoszącym pięty. Zamkniętokomórkowa pianka dopasowuje się do podeszwy i rozkłada obciążenie na całą powierzchnię nośną, odciążając obwód ściany. W opcjach - wkładki z filcu technicznego lub z wełny naturalnej. Cholewka odgina się całkowicie do tyłu, co ułatwia zakładanie i zdejmowanie.

Cloud **nie jest przeznaczony do jazdy**. Dopuszczalny jest lekki wybieg. But sprzedawany jest **na sztuki**.

Dla jakich koni sprawdzi się najlepiej?

- Ochwat, cienka podeszwa, ropień, founder
- Przewlekła kulawizna wymagająca maksymalnie miękkiego podparcia
- Konie potrzebujące uniesienia pięt (klin 2°)
- Odpoczynek po treningu i transport
- Stanie na twardej posadzce
- Duże kopyta - zakres rozmiarów do 191 mm szerokości

Cloud a Easyboot Rx2

Cecha	Easyboot Cloud	Easyboot Rx2
Przeznaczenie	Terapia, nie do jazdy	Terapia, nie do jazdy
Wkładka	EVA Comfort Pad, klin 2°	Zintegrowana śródpodeszwa RE, bez klina
Twardość	stała, zależna od wkładki, cieńsza	Twardsza śródpodeszwa



	podeszwa	
Mechanika	Płaska podeszwa + klin	Rocker / przetoczenie
Wysokość kopyta	zależna od wkładki	Blżej podłoża, lżejszy but
Rozmiary	00-8 (89-191 mm szer.)	000-7 (70-170 mm szer.)
Kuce / bardzo małe kopyta	Ograniczony zakres	Lepszy wybór
Bardzo duże kopyta	Lepszy wybór	Ograniczony zakres

Cloud jest korzystniejszy, gdy:

- potrzebne jest uniesienie pięt,
- koń wymaga maksymalnie miękkiego podparcia,
- kopyto jest większe niż zakres Rx2,
- planowana jest wymiana lub indywidualne zestawianie wkładek.

Rx2 jest korzystniejszy, gdy:

- potrzebne jest przetoczenie (rocker),
- koń ma zostać bliżej podłoża,
- liczy się mniejsza masa buta,
- kopyto jest bardzo małe (od 70 mm).

Jak dobrać rozmiar Easyboot Cloud?

Pomiary należy wykonać na świeżo obciążonym kopycie.

- **Szerokość** – w najszerszym miejscu
- **Długość** – od czubka do linii nośnej pięty, bez opuszek

Długość i szerokość powinny wskazywać ten sam rozmiar. Jeśli wskazują dwa sąsiednie, wybiera się większy. Jeśli różnica wynosi więcej niż jeden rozmiar, Cloud może nie być odpowiednim modelem.

Przy opatrunku lub grubszej wkładce warto rozważyć rozmiar większy.

Tabela rozmiarów (mm)

Rozmiar	Szerokość (mm)	Długość (mm)
00	89-99	102-112
0	98-108	112-118
1	108-124	118-131
2	124-133	131-137
3	133-149	137-150
4	149-159	150-159
5	159-170	159-170
6	170-177	170-177
7	177-188	177-188
8	188-191	188-201

Buty nie są oznaczone jako lewy i prawy. Warto jednak na stałe przypisać każdy egzemplarz do konkretnej nogi.

Wskazówki:

- Cloud nie służy do jazdy ani treningu.
- Wkładkę EVA wymienia się w miarę zużycia.
- Kopyto powinno regularnie przewietrzać się poza butem.
- W razie wątpliwości prosimy o przesłanie zdjęć kopyt wraz z pomiarami.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 0 , 00 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 (+ 90,00 zł) , 6 (+ 90,00 zł) , 7 (+ 90,00 zł) , 8 (+ 90,00 zł)

Wkładka - wybierz: filc techniczny - 10mm - miękki (+ 12,30 zł) , filc techniczny - 6mm - bardzo miękki (+ 12,30 zł) , w zestawie z butem wkładka z pianki EVA - kątowna 2,5° , wełna naturalna - 10mm (+ 30,00 zł) , wełna naturalna - 6mm (+ 30,00 zł) , wełna naturalna - wykonanie specjalne - wycięcie według rysunku (+ 45,00 zł)

Jak prawidłowo mierzyć kopyta

Wykonywanie pomiarów

Prawidłowy pomiar kopyt konia jest jednym z najważniejszych kroków, które należy podjąć, aby uzyskać dobre dopasowanie i optymalną wydajność. Z pewnością nikt z nas nie biegałby w butach za dużych lub za małych, więc nie oczekuj, że zrobią to nasze konie !!


Poniżej wyjaśniamy krok po kroku, jak wykonać wymagane pomiary:

Pamiętaj, że aby dokonać prawidłowego pomiaru, musisz to zrobić na kopycie niepodkutym i po jego ostatnim naturalnym cięciu. Kopyto powinno mieć co najmniej wyważone pięty i dobre mustang roll.

Do prawidłowego pomiaru potrzebujesz tylko sztywnej taśmy mierniczej, która mierzy w mm i czyste kopyto.

Referencje do wykonania pomiarów

Odnośniki, które należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu prawidłowych pomiarów kopyt:

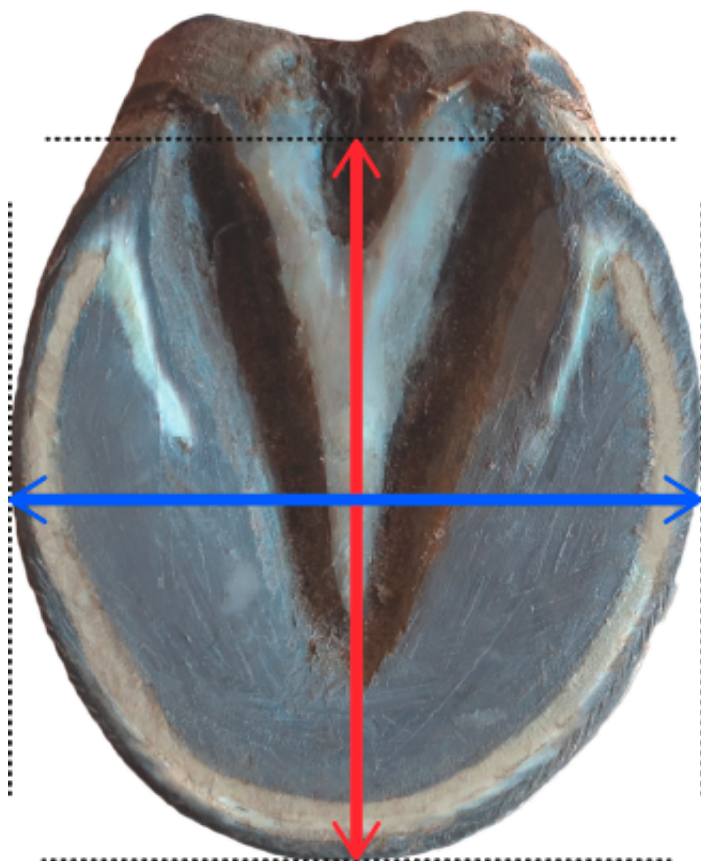

Szerokość:

niebieska linia (maksymalna szerokość kopyta).

Długość:

czerwona linia (odległość między podporą pięty a palcem).


Pomiar szerokości kopyt

Aby dokonać prawidłowego pomiaru, zmierz kopyto w najszerszym miejscu.

Pamiętaj, że maksymalna szerokość nie zawsze będzie w tym samym miejscu we wszystkich kopytach, ponieważ zależy to od

konkretnego kształtu kopyt.

Pamiętaj, aby umieścić taśmę mierniczą tak prosto, jak to możliwe, z jednej strony na drugą, ponieważ ukośne położenie taśmy spowoduje nieprawidłowe pomiary.

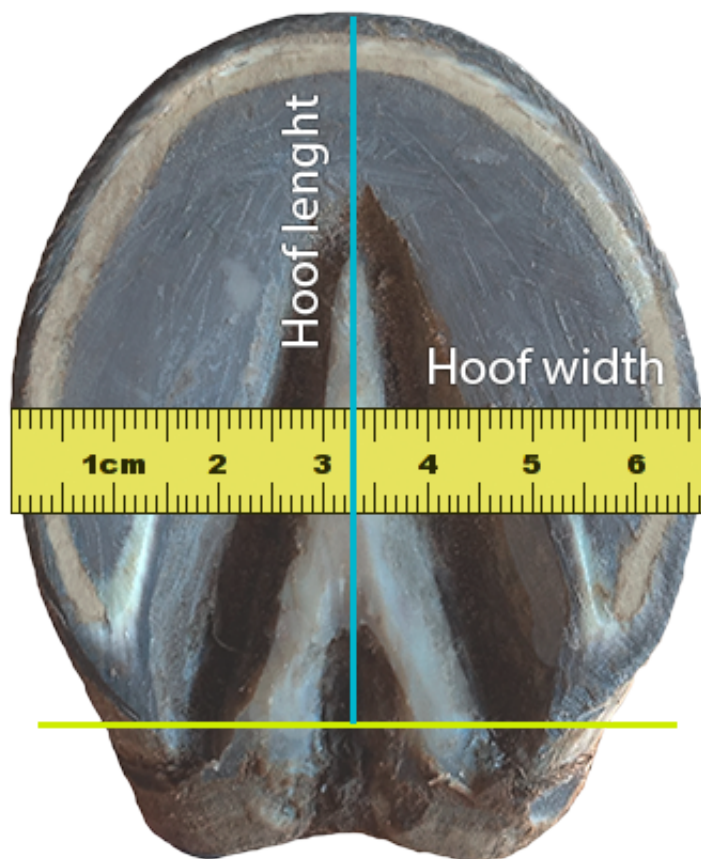


Pomiar długości kopyt

Jest to pomiar od czubka pazura do końca kątów wsporowych. Aby poprawnie wykonać ten pomiar, należy zlokalizować oba kąty wsporowe, czyli tam, gdzie kończy się ściana kopyta, narysować między nimi wyimaginowaną linię prostą i wykonać pomiar od tej linii do czubka kopyta przechodzącego przez środek strzałki.

Pamiętaj, że długość kopyt nie obejmuje piątek, ponieważ będą one zawarte w pięcie buta, a nie w podeszwie.

Używanie prostej linijki lub tarnika do zaznaczenia linii łączącej obie przypory pięty może pomóc w pomiarze długości kopyt.

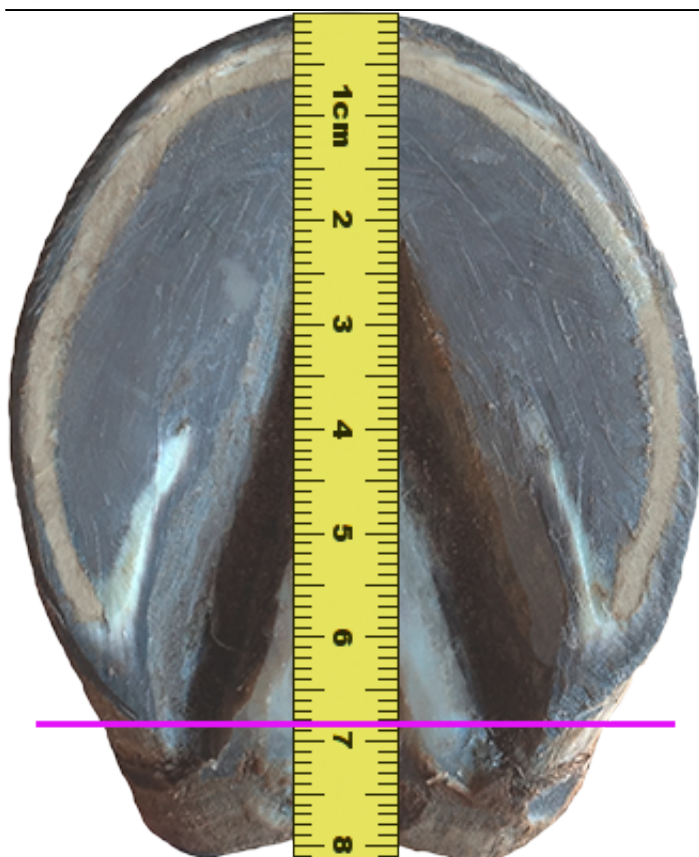

Przypadki specjalne; kopyta z nierównoważonymi piętami

Możliwe, że rysując linię między dwoma przyporami pięty, stwierdzisz, że linia ta nie jest prosta, ale ukośna, co oznacza, że pięty są nierównoważone. W takim przypadku również zmierz odległość od palca do najdalszej przypory pięty, ale wskazane jest skonsultowanie się z podiatrą, aby można było je odpowiednio zrównoważyć.

Warto pamiętać, że Easyboot Cloud, jako but o dużej tolerancji wymiarów, przeznaczony do celów rehabilitacyjnych, często będzie lepiej spełniał swoją rolę, jeśli nie będzie ściśle dopasowany; w przypadku gdy wymiary kopyta wskazują na granicę rozmiarów, należy wybrać rozmiar większy. Umożliwi to zastosowanie buta z indywidualnie dobranymi wkładkami, opatrunkiem itd.

Easyboot Cloud - przewodnik użytkowania

Porównanie butów Easyboots Cloud i nowych Rx2

Porównaj: Easyboot Cloud vs Easyboot Rx2



Zarówno [Easyboot Rx2](#) , jak i [Easyboot Cloud](#) to fantastyczne opcje w naszej ofercie terapii. Niezależnie od tego, czy Twój koń aktywnie uczestniczy w zawodach, czy też jest na emeryturze, posiadanie sprawdzonego buta terapeutycznego jest pomocne dla wszystkich koni i właścicieli koni. Zastanawiasz się, który but będzie lepszy dla Twojego konia? Rozważ te podobieństwa i różnice.

Podobieństwa

Zarówno [Easyboot Cloud](#) , jak i [Easyboot Rx2](#) zapewniają amortyzację, wsparcie i ochronę kopyt. Te buty zapewniają komfort przy różnych kulawiznach, czy to z bólem stopy, cienką podszewą, trzeszczką, założycielem czy częstymi ropniami. Obydwa buty są przydatne podczas ciągnięcia przyczepy, pomagając Twojemu koniowi amortyzować nierówności, zakręty i nieoczekiwane zatrzymania na przyczepie. Dodatkowo zapewniają komfort podczas stania lub stania przez dłuższy czas. Jeśli stoisz na zawodach na betonie, buty mogą pomóc w zapobieganiu bolesności kopyt i tworzeniu zapasów.

Różnice

Chociaż oba buty zapewnią wygodę i wsparcie w różnych sytuacjach, istnieje kilka cech, które je wyróżniają. Weź pod uwagę te różnice, próbując wybrać najlepszą



opcję dla swojego konia.

1. Rozmiar

Buty Easyboot [Cloud](#) oferowane są w 10 rozmiarach: od najmniejszych o szerokości 89-99 mm do największych o szerokości 188-191 mm.

Easyboot Cloud - MM		
Size	Width in mm	Length in mm
00	89-99mm	102-112mm
0	98-108mm	112-118mm
1	108-124mm	118-131mm
2	124-133mm	131-137mm
3	133-149mm	137-150mm
4	149-159mm	150-159mm
5	159-170mm	159-170mm
6	170-177mm	170-177mm
7	177-188mm	177-188mm
8	188-191mm	188-201mm

Easyboot [Rx2](#) jest również oferowany w 10 rozmiarach. Najmniejszy ma szerokość 70-80 mm, a największy 160-170 mm.

Easyboot Rx2		
Size	Width in mm	Length in mm
000	70-80	80-90
00	80-90	90-100
0	90-100	100-110
1	100-110	110-120
2	110-120	120-130
3	120-130	130-140
4	130-140	140-150
5	140-150	150-160
6	150-160	160-170
7	160-170	170-180

Jeśli szukasz małego buta dla kucyka, Rx2 może być lepszą opcją. Jeśli szukasz dużego buta dla większych kopyt, Cloud może być dla Ciebie lepszą opcją. Jeśli znajdujesz się gdzieś pośrodku, może to nie być decydujący czynnik.

2. Projekt

Cloud jest wyposażony w [wygodną podkładkę EVA](#) z klinem o 2 stopniach . W razie potrzeby możesz wymienić tę podkładkę. Czy Twój koń potrzebuje klina do uniesienia i wsparcia pięty? Jeśli tak, Easyboot Cloud jest dla Ciebie najlepszym wyborem.

Easyboot [Rx2](#) został zaprojektowany ze zintegrowaną podeszwą środkową RE (mieszanka gumy/EVA), utrzymując kopyto niżej przy podłożu. Nie jest wymagane

dodatkowe wypełnienie. Podeszwa środkowa nie ma klina. Bez dodatkowego wypełnienia koń siedzi bliżej podłoża, a sam but jest lżejszy, co sprawia, że Rx2 jest naszym najlżejszym wyborem butów terapeutycznych.



3. Skala twardości

Czy chcesz, aby Twój koń miał bardziej miękką czy twardą podkładkę? [Podkładka EVA Cloud](#) jest o około 45% bardziej miękka niż podeszwa środkowa Rx2 w skali twardości Shore A. Jeśli Twój koń potrzebuje maksymalnego wsparcia przy chronicznej kulawiznie, Cloud może być lepszym wyborem.



4. Mechanika kopyt

Rx2 ma rockerowe dno, co może być korzystne w różnych sytuacjach terapeutycznych. Ponadto Rx2 można modyfikować [na](#) wiele sposobów, aby sprostać potrzebom różnych koni. Możesz stworzyć efekt wałka, usuwając krawędzie bieżnika za pomocą szczypiec.



5. Bieżnik

Wzór bieżnika Easyboot [Cloud](#) jest taki sam jak w modelach Easyboot Glove, Glue-On, Flip Flop, Back Country i Epic. Ten wzór bieżnika jest kompatybilny z naszym [systemem Therapy Click](#). System Therapy Click to pomoc terapeutyczna i punkt wyjścia do zmiany przejścia i uniesienia pięty. Zarówno podstawy 5-stopniowe, jak i 10-stopniowe zostały zaprojektowane z dodatkową głębokością, aby zapewnić profesjonalistom możliwość dostosowania do każdego unikalnego przypadku.



Pozycję breakover i wysokość pięty można szybko zmienić za pomocą tarki lub szlifierki. Dodaj dodatkową wysokość za pomocą produktów klejących. Zalecamy, aby [Therapy Click System](#) był używany TYLKO wtedy, gdy lekarz weterynarii doradzi w kwestii konkretnych potrzeb każdego indywidualnego przypadku.



Rx2 ma nowy wzór bieżnika z bardziej agresywnymi rowkami. Nie jest on kompatybilny z systemem Therapy Click.



6. System zamykania

Rx2 sięga wyżej w okolicy pęciny i jest wyściełany , aby zapobiec otarciom.

Dopasowana cholewka pomaga zapobiegać przedostawaniu się wiórów i zanieczyszczeń do buta. Paski są elastyczne, aby pomóc rozciągnąć się i uzyskać ściśle dopasowanie.

[Zapięcie Cloud](#) nie sięga tak wysoko nad pęcinę. Paski nie są elastyczne, a powierzchnia rzepu jest większa w porównaniu do Rx2.

