

Link do produktu: <https://konwbutach.com.pl/podkowy-easyshoe-one-glue-1-para-p-104.html>

Podkowy EasyShoe One Glue - 1 para



Cena brutto	265,00 zł
Cena netto	215,45 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni

Opis produktu

EasyShoe One Glue - dwugęstościowa podkova klejona - 1 para

(z opcją z mankietów grzybkowych dostępnych tu: <https://konwbutach.com.pl/mankiety-grzybkowe-do-podkowy-easyshoe-one-glue-1-para-p-140.html>)

EasyShoe One Glue to dwugęstościowa podkova poliuretanowa z miękkim wsparciem strzałki i zintegrowanymi mankietami do klejenia. Jeden, nieco wydłużony kształt pasuje zarówno na przody, jak i na tyły. Pięty można łatwo skrócić i wyprofilować tarką lub szlifierką, a nacięcia na środku pozwalają usunąć górną część wsparcia albo całe wsparcie strzałki.

Podkowę można zamocować na dwa sposoby: klasycznie – klejem akrylowym lub uretanowym w mankiety – albo przez **mankiety Mushroom** i super glue. Druga metoda jest szybsza, nie wymaga pistoletu do kleju i pozwala wielokrotnie resetować tę samą parę podków.

Dla jakich koni sprawdzi się najlepiej?

- Konie, które potrzebują amortyzacji strzałki i odciążenia podeszwy
- Konie w rehabilitacji i po okresie wrażliwości podeszwy
- Konie sportowe, u których liczy się lekkość i komfort
- Konie z nieregularną ścianą kopyta – mankiety wypełniające szczeliny dobrze to maskują
- Sytuacje, w których podkowę chce się zdejmować i zakładać w trakcie cyklu

Najważniejsze zalety:

- Dwugęstościowy poliuretan: twardsza podeszwa + miękkie wsparcie strzałki
- Wbudowane odciążenie podeszwy
- Jeden kształt na przody i tyły
- Możliwość przycięcia pięt i wycięcia wsparcia strzałki
- Dwa systemy mocowania: klej wypełniający albo mankiety Mushroom + super glue
- Kompatybilna z klinem EasyShoe One Wedge (2,5°, możliwość piętrowania)
- Możliwość dodania Quick Studs lub gwintów 3/8"
- Sprzedawana w parach

Mocowanie mankietami Mushroom

Mushroom Cuff to wkładka, która zatrzaskuje się w mankiecie EasyShoe One Glue i tworzy gładką powierzchnię pod **super glue**.

Jak to działa:

1. Mankiety Mushroom zatrzaskuje się w podkowie **przed** klejeniem.
2. Super glue nakłada się od wewnątrz mankieta.
3. Podkowę nasuwa się na kopyto i owija folią na czas wiązania.
4. Przy resecie podkowę odciąga się od mankietów – klej zostaje na mankiecie, a nie na podkowie.

Dzięki temu:



- aplikacja jest szybsza i prostsza niż przy kleju akrylowym
- podkowa pozostaje czysta i nadaje się do kolejnych resetów
- mankiety można wymieniać, a samą podkowę używać wielokrotnie
- przy odpowiednim przygotowaniu podkowę da się zdejmować i zakładać w trakcie cyklu

Ważne przy mankietach Mushroom:

- Na **1 parę podków** potrzebne są **2 pary** mankietów Mushroom (jedna para = jedno kopyto).
- Rozmiar mankietu = rozmiar podkowy.
- Mushroom Cuff pasuje do EasyShoe One Glue i Triple D. Nie pasuje do Speed, Versa Grip, Race ani Roller.
- Do jazdy sportowej mankiety można dodatkowo podkleić super glue, aby zwiększyć pewność mocowania.

Zalecane kleje:

- Bez mankietów Mushroom: HoofLox Acrylic, HoofLox Urethane, HoofLox Platinum lub inny klej akrylowy / uretanowy
- Z mankietami Mushroom: EasyShoe Quick Set Super Glue / Maxi-Cure

Jak dobrać rozmiar EasyShoe One Glue?

Rozmiar odpowiada najszerszemu miejscu kopyta.

Pomiary wykonuj na świeżo obciętych kopycie. Długość dopasowuje się przez skrócenie pięt.

Tabela rozmiarów

Rozmiar	Szerokość (mm)	Długość (mm)
110	104-110	130
114	108-114	133
118	112-118	137
122	116-122	141
126	120-126	146
130	124-130	151
134	128-134	155
138	132-138	159
142	136-142	164
146	140-146	168
150	144-150	176
154	148-154	181

Jak mierzyć:

- szerokość – w najszerszym miejscu świeżo obciętego kopyta
- długość – od czubka do linii nośnej pięty (bez opuszek)

Jeden kształt służy na przody i tyły. Jeśli kopyto jest krótsze, pięty podkowy skraca się tarką lub szlifierką. Gdy pomiar jest na granicy zakresu, bezpieczniej wybrać większy rozmiar.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 110 , 114 , 118 , 122 , 126 , 130 , 134 , 138 , 142 , 146

Jak prawidłowo mierzyć kopyta

Wykonywanie pomiarów

Prawidłowy pomiar kopyt konia jest jednym z najważniejszych kroków, które należy podjąć, aby uzyskać dobre dopasowanie i optymalną wydajność. Z pewnością nikt z nas nie biegałby w butach za dużych lub za małych, więc nie oczekuj, że zrobią to nasze konie !!

Poniżej wyjaśniamy krok po kroku, jak wykonać wymagane pomiary:


Pamiętaj, że aby dokonać prawidłowego pomiaru, musisz to zrobić na kopycie niepodkutym i po jego ostatnim naturalnym

cięciu. Kopyto powinno mieć co najmniej wyważone pięty i dobre mustang roll.

Do prawidłowego pomiaru potrzebujesz tylko sztywnej taśmy mierniczej, która mierzy w mm i czyste kopyto.

Referencje do wykonania pomiarów

Odnosniki, które należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu prawidłowych pomiarów kopyt:

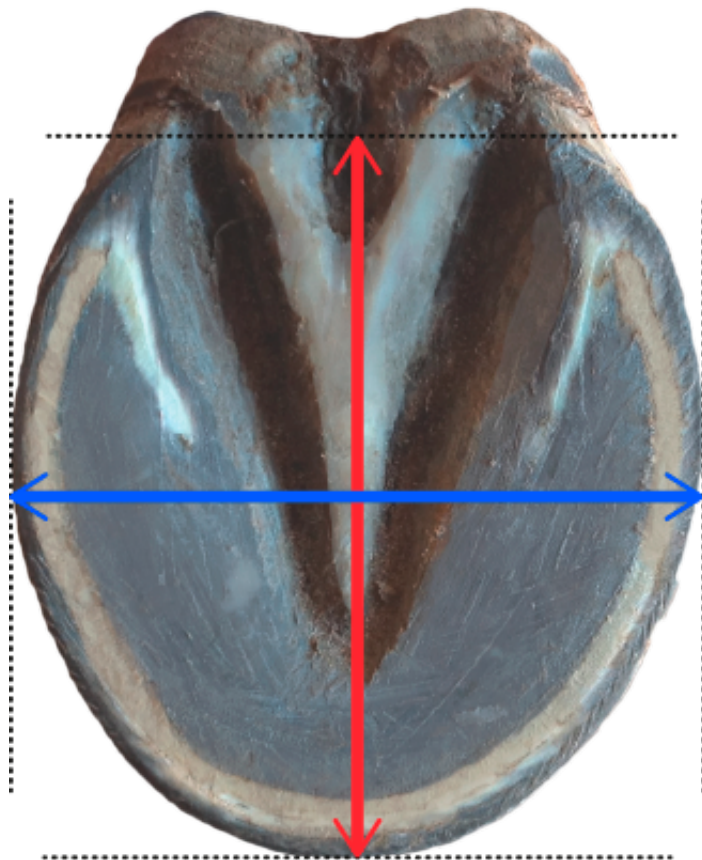

Szerokość:

niebieska linia (maksymalna szerokość kopyta).

Długość:


czerwona linia (odległość między podporą pięty a palcem).

Pomiar szerokości kopyt

Aby dokonać prawidłowego pomiaru, zmierz kopyto w najszerszym miejscu.

Pamiętaj, że maksymalna szerokość nie zawsze będzie w tym samym miejscu we wszystkich kopytach, ponieważ zależy to od konkretnego kształtu kopyt.

Pamiętaj, aby umieścić taśmę mierniczą tak prosto, jak to możliwe, z jednej strony na drugą, ponieważ ukośne położenie taśmy spowoduje nieprawidłowe pomiary.

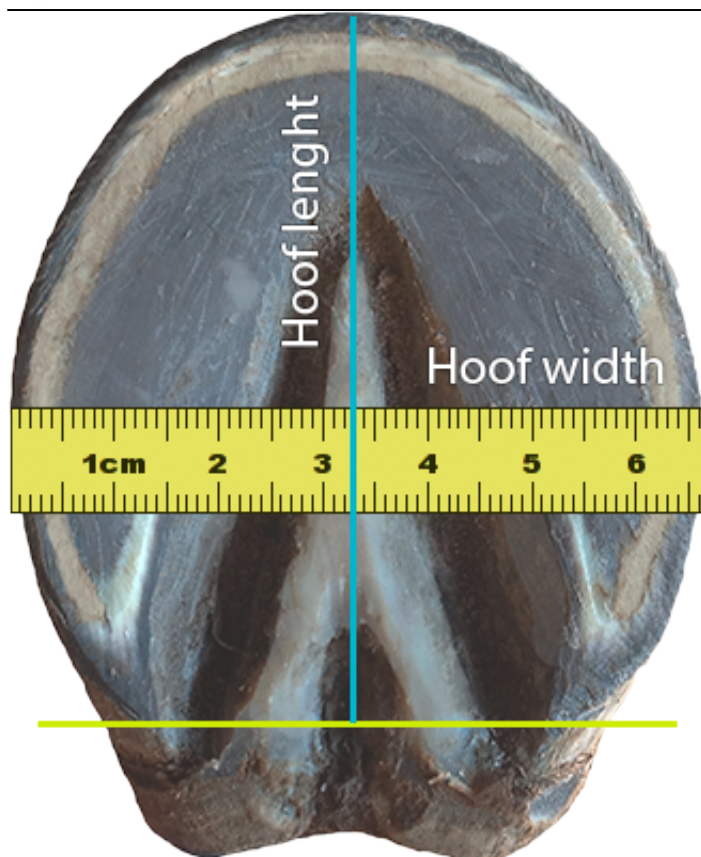


Pomiar długości kopyt

Jest to pomiar od czubka pazura do końca kątów wsporowych. Aby poprawnie wykonać ten pomiar, należy zlokalizować oba kąty wsporowe, czyli tam, gdzie kończy się ściana kopyta, narysować między nimi wyimaginowaną linię prostą i wykonać pomiar od tej linii do czubka kopyta przechodzącego przez środek strzałki.

Pamiętaj, że długość kopyt nie obejmuje piątek, ponieważ będą one zawarte w pięcie buta, a nie w podeszwie.

Używanie prostej linijki lub tarnika do zaznaczenia linii łączącej obie przypory pięty może pomóc w pomiarze długości kopyt.

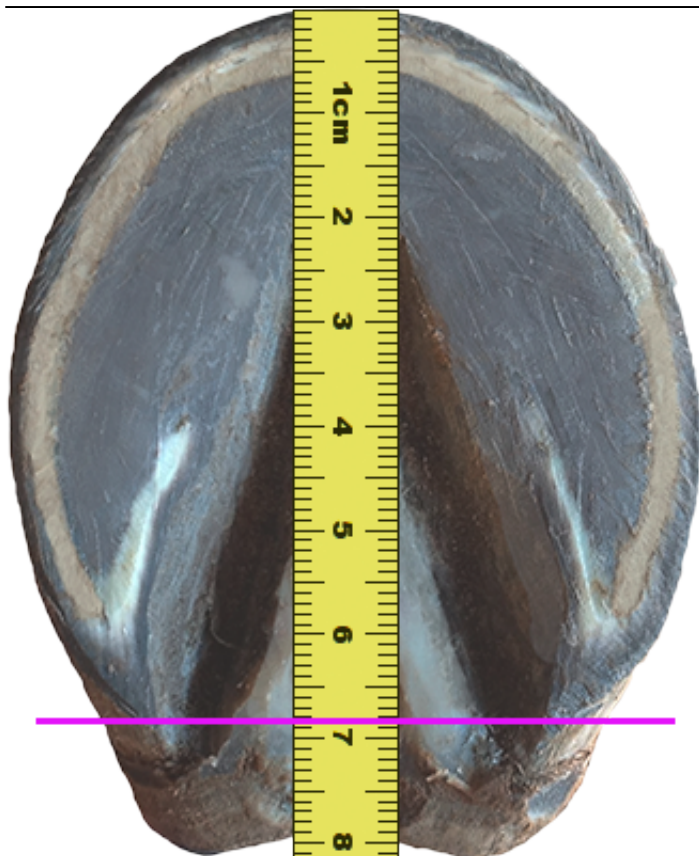

Przypadki specjalne; kopyta z nierównoważonymi piętami

Możliwe, że rysując linię między dwoma przyporami pięty, stwierdzisz, że linia ta nie jest prosta, ale ukośna, co oznacza, że pięty są nierównoważone. W takim przypadku również zmierz odległość od palca do najdalszej przypory pięty, ale wskazane jest skonsultowanie się z podiatrą, aby można było je odpowiednio zrównoważyć.