

Link do produktu: <https://konwbutach.com.pl/but-ochronny-woofwear-ochrona-opatrunku-kopyta-w-przypadku-leczenia-infekcji-i-otarc-p-172.html>




But ochronny WoofWear - ochrona opatrunku, kopyta w przypadku leczenia infekcji i otarć

Cena	240,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

But ochronny WoofWear - ochrona opatrunku, kopyta w przypadku leczenia infekcji i otarć - 1 szt.

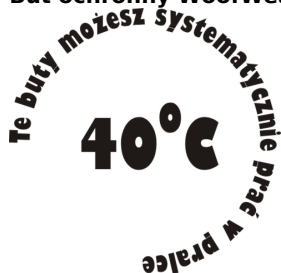

Rozmiary 4, 5 i 6 - dostępne w 24 godziny

Medyczny ochraniacz na kopyta to idealne rozwiązanie do bezstresowego okładania i pielęgnacji kopyt. Niezależnie od tego, czy leczysz ropień, aplikujesz leki, czy zabezpieczasz ranę, ten ochraniacz utrzymuje kopyto w czystości, suchości i bezpieczeństwie – w stajni lub na padoku. Wykonany z superelastycznego neoprenu ochraniacz zapewnia ścisłe dopasowanie, a podeszwa wewnętrzna z Kevlaru® zapewnia wyjątkową trwałość, szczególnie na nierównych lub mokrych nawierzchniach. Antypoślizgowa gumowa podeszwa zewnętrzna zapewnia dodatkową przyczepność, zmniejszając ryzyko poślizgnięcia się na twardym podłożu.

Cena za 1 szt. .

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9

Wkładka - wybierz: bez wkładki , wełna naturalna - 4mm (+ 30,00 zł), wełna naturalna - 6mm (+ 30,00 zł)

Jak prawidłowo mierzyć kopyta

Wykonywanie pomiarów

Prawidłowy pomiar kopyt konia jest jednym z najważniejszych kroków, które należy podjąć, aby uzyskać dobre dopasowanie i optymalną wydajność. Z pewnością nikt z nas nie biegałby w butach za dużych lub za małych, więc nie oczekuj, że zrobią to nasze konie !!

Poniżej wyjaśniamy krok po kroku, jak wykonać wymagane pomiary:


Pamiętaj, że aby dokonać prawidłowego pomiaru, musisz to zrobić na kopycie niepodkutym i po jego ostatnim naturalnym

cięciu. Kopyto powinno mieć co najmniej wyważone pięty i dobre mustang roll.

Do prawidłowego pomiaru potrzebujesz tylko sztywnej taśmy mierniczej, która mierzy w mm i czyste kopyto.

Referencje do wykonania pomiarów

Odnosniki, które należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu prawidłowych pomiarów kopyt:

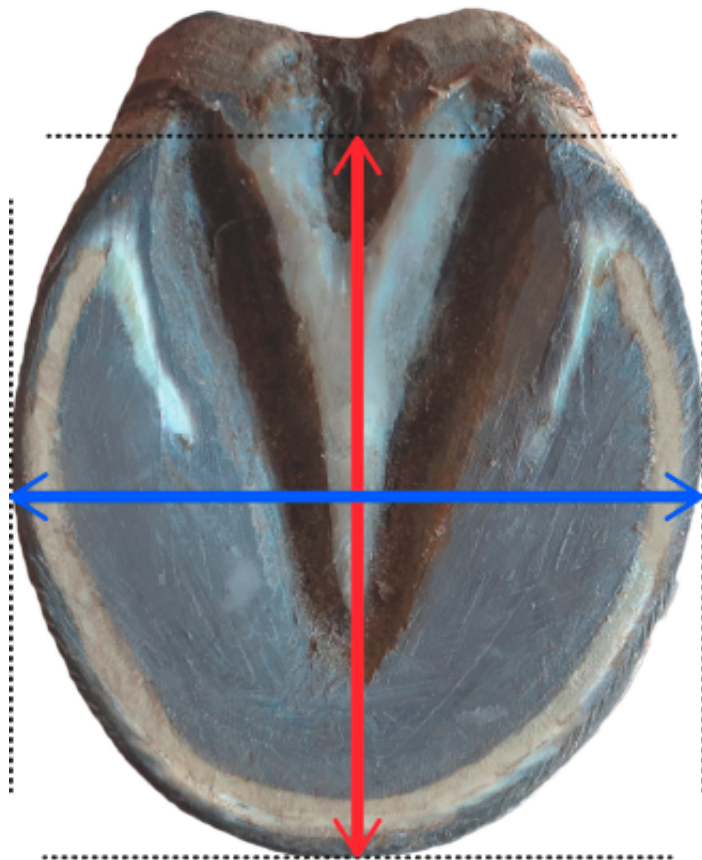

Szerokość:

niebieska linia (maksymalna szerokość kopyta).

Długość:


czerwona linia (odległość między podporą pięty a palcem).

Pomiar szerokości kopyt

Aby dokonać prawidłowego pomiaru, zmierz kopyto w najszerszym miejscu.

Pamiętaj, że maksymalna szerokość nie zawsze będzie w tym samym miejscu we wszystkich kopytach, ponieważ zależy to od konkretnego kształtu kopyt.

Pamiętaj, aby umieścić taśmę mierniczą tak prosto, jak to możliwe, z jednej strony na drugą, ponieważ ukośne położenie taśmy spowoduje nieprawidłowe pomiary.

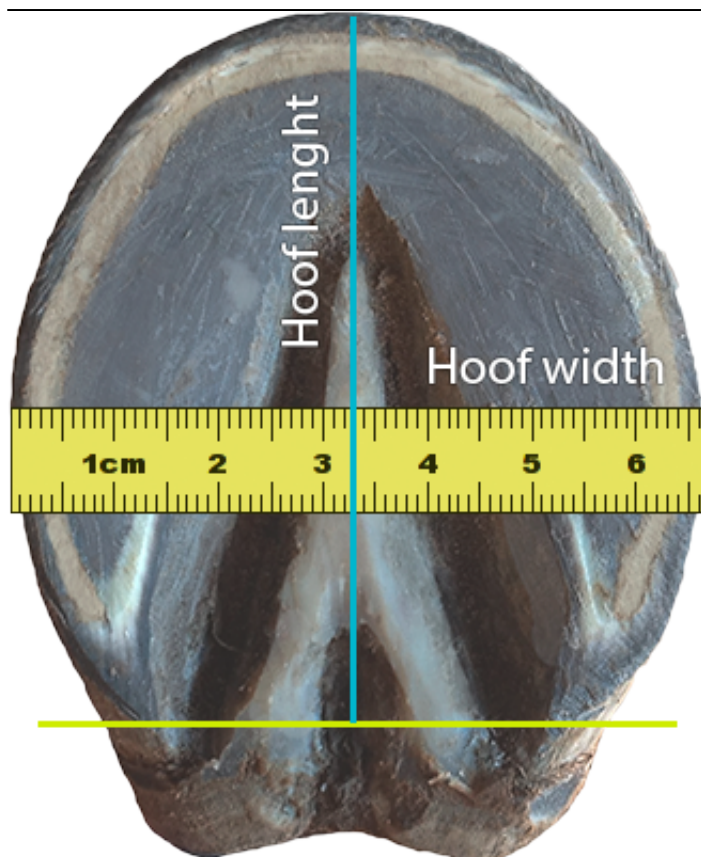


Pomiar długości kopyt

Jest to pomiar od czubka pazura do końca kątów wsporowych. Aby poprawnie wykonać ten pomiar, należy zlokalizować oba kąty wsporowe, czyli tam, gdzie kończy się ściana kopyta, narysować między nimi wyimaginowaną linię prostą i wykonać pomiar od tej linii do czubka kopyta przechodzącego przez środek strzałki.

Pamiętaj, że długość kopyt nie obejmuje piątek, ponieważ będą one zawarte w pięcie buta, a nie w podeszwie.

Używanie prostej linijki lub tarnika do zaznaczenia linii łączącej obie przypory pięty może pomóc w pomiarze długości kopyt.

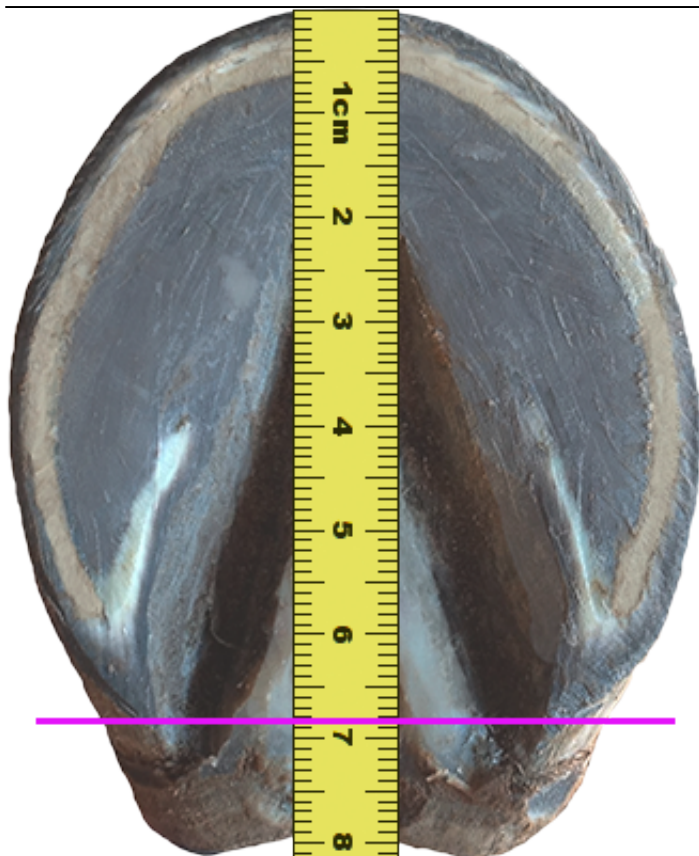

Przypadki specjalne; kopyta z nierównoważonymi piętami

Możliwe, że rysując linię między dwoma przyporami pięty, stwierdzisz, że linia ta nie jest prosta, ale ukośna, co oznacza, że pięty są nierównoważone. W takim przypadku również zmierz odległość od palca do najdalszej przypory pięty, ale wskazane jest skonsultowanie się z podiatrą, aby można było je odpowiednio zrównoważyć.

Warto pamiętać, że Easyboot Cloud, jako but o dużej tolerancji wymiarów, przeznaczony do celów rehabilitacyjnych, często będzie lepiej spełniał swoją rolę, jeśli nie będzie ściśle dopasowany; w przypadku gdy wymiary kopyta wskazują na granicę rozmiarów, należy wybrać rozmiar większy. Umożliwi do zastosowanie buta z indywidualnie dobranymi wkładkami, opatrunkiem itd.