Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 21:05

Link do produktu: https://konwbutach.com.pl/mankiety-grzybkowe-do-podkowy-easyshoe-one-glue-1-para-p-140.html



Mankiety grzybkowe do podkowy EasyShoe One Glue - 1 para

Cena brutto	**77,00 zł**
Cena netto	**62,60 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**

Opis produktu

EasyShoe One Mushroom Cuff – mankiety grzybkowe do EasyShoe One Glue i Triple D/ Ultra Triple D - 1 para

EasyShoe One Mushroom Cuff to wkładki, które zatrzaskują się w mankietach podkowy EasyShoe One Glue lub Triple D i zamieniają je w powierzchnię pod **super glue**. Dzięki temu podkowę można kleić szybko, bez pistoletu i końcówek mieszających, a przy resecie zdejmuje się samą podkowę – mankiet zostaje na kopycie albo jest wymieniany na nowy.

System działa jak zatrzask: mankiet przykleja się do ściany kopyta, a podkowa wpina się w charakterystyczne „grzybki". Podkowa nie oblepia się klejem, więc jedną parę da się resetować wielokrotnie.

Do czego służą?

- Do klejenia EasyShoe One Glue i Triple D super glue
- Do szybkiego resetu bez czyszczenia zaschniętego kleju z podkowy
- Do zdejmowania i zakładania podkowy w trakcie cyklu
- Gdy chcesz prostszej aplikacji niż klej akrylowy / uretanowy

Najważniejsze zalety:

- Zatrzask w kształcie grzybka – pewne połączenie z mankietem podkowy
- Aplikacja super glue, bez pistoletu i mieszadeł
- Czysta podkowa po zdjęciu – więcej resetów z jednej pary
- Możliwość wymiany samych mankietów
- Nadają się także do jazdy, nie tylko do stajni
- Sprzedawane w parach

Jak stosować:

1. Dobierz rozmiar mankietu taki sam jak rozmiar podkowy.
2. Zatrzaśnij mankiety Mushroom w mankietach podkowy **przed** klejeniem.
3. Nałóż cienką warstwę super glue od wewnątrz.
4. Nasuń podkowę na kopyto i owiń folią na czas wiązania.
5. Przy resecie odciągnij podkowę od mankietów. Podkowa zostaje czysta; mankiety można zostawić, wymienić albo użyć ponownie.

Ważne:

- Na **1 parę podków** potrzebne są **2 pary** mankietów Mushroom (jedna para obsługuje jedno kopyto).
- Pasują tylko do **EasyShoe One Glue** i **EasyShoe Triple D**.
- Nie pasują do Speed, Versa Grip, Race ani Roller.
- Przy intensywnej jeździe mankiety można dodatkowo podkleić do mankietu podkowy, aby zwiększyć pewność mocowania.
- Podkowy sprzedawane są osobno.

Zalecany klej:

EasyShoe Quick Set Super Glue / Maxi-Cure.

Jak dobrać rozmiar?

Rozmiar mankietu = rozmiar podkowy EasyShoe One Glue / Triple D.

Rozmiar	Szerokość podkowy (mm)	Długość podkowy (mm)
110	104–110	130
114	108–114	133
118	112–118	137
122	116–122	141
126	120–126	146
130	124–130	151
134	128–134	155
138	132–138	159
142	136–142	164
146	140–146	168
150	144–150	176
154	148–154	181

Przykład:
Koń w EasyShoe One Glue 126 – zamów mankiety Mushroom 126.
Na parę podków zamów **2 pary** mankietów.

EasyShoe One Glue: Kluczowe cechy
Skoki przez przeszkody w butach EasyShoe One Glue
Proste klejenie: EasyShoe One Glue

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 110 , 114 , 118 , 122 , 126 , 130 , 134 , 138 , 142 , 146

Jak prawidłowo mierzyć kopyta


Wykonywanie pomiarów
Prawidłowy pomiar kopyt konia jest jednym z najważniejszych kroków, które należy podjąć, aby uzyskać dobre dopasowanie i optymalną wydajność. Z pewnością nikt z nas nie biegałby w butach za dużych lub za małych, więc nie oczekuj, że zrobią to nasze konie !!

Poniżej wyjaśniamy krok po kroku, jak wykonać wymagane pomiary:

Pamiętaj, że aby dokonać prawidłowego pomiaru, musisz to zrobić na kopycie niepodkutym i po jego ostatnim naturalnym cięciu. Kopyto powinno mieć co najmniej wyważone pięty i dobre mustang roll.

Do prawidłowego pomiaru potrzebujesz tylko sztywnej taśmy mierniczej, która mierzy w mm i czyste kopyto.

Referencje do wykonania pomiarów
Odnośniki, które należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu prawidłowych pomiarów kopyt:

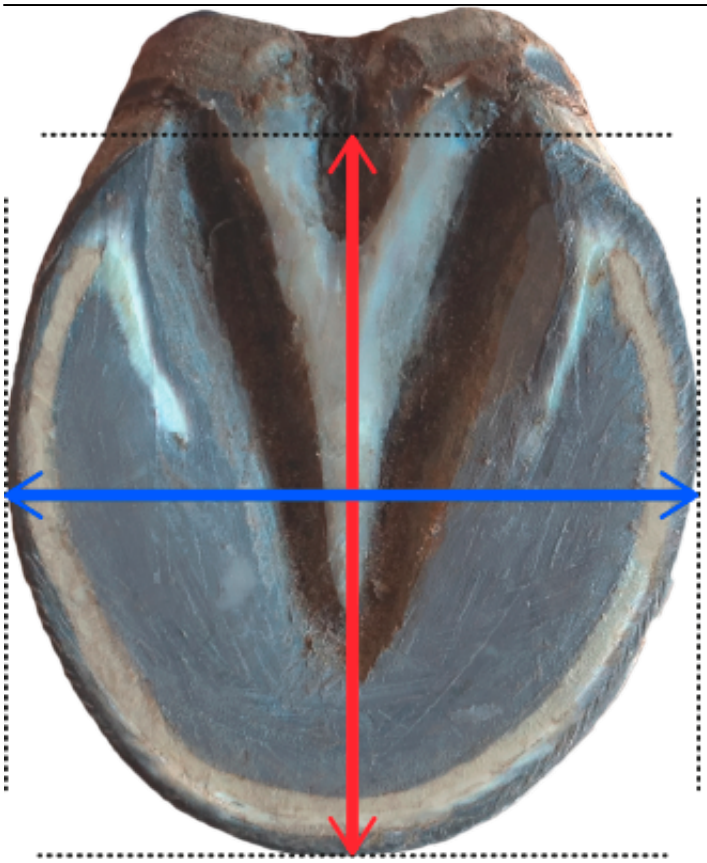


Szerokość:
niebieska linia (maksymalna szerokość kopyta).
Długość:
czerwona linia (odległość między podporą pięty a palcem).

Pomiar szerokości kopyt
Aby dokonać prawidłowego pomiaru, zmierz kopyto w najszerszym miejscu.

Pamiętaj, że maksymalna szerokość nie zawsze będzie w tym samym miejscu we wszystkich kopytach, ponieważ zależy to od konkretnego kształtu kopyt.

Pamiętaj, aby umieścić taśmę mierniczą tak prosto, jak to możliwe, z jednej strony na drugą, ponieważ ukośne położenie taśmy spowoduje nieprawidłowe pomiary.

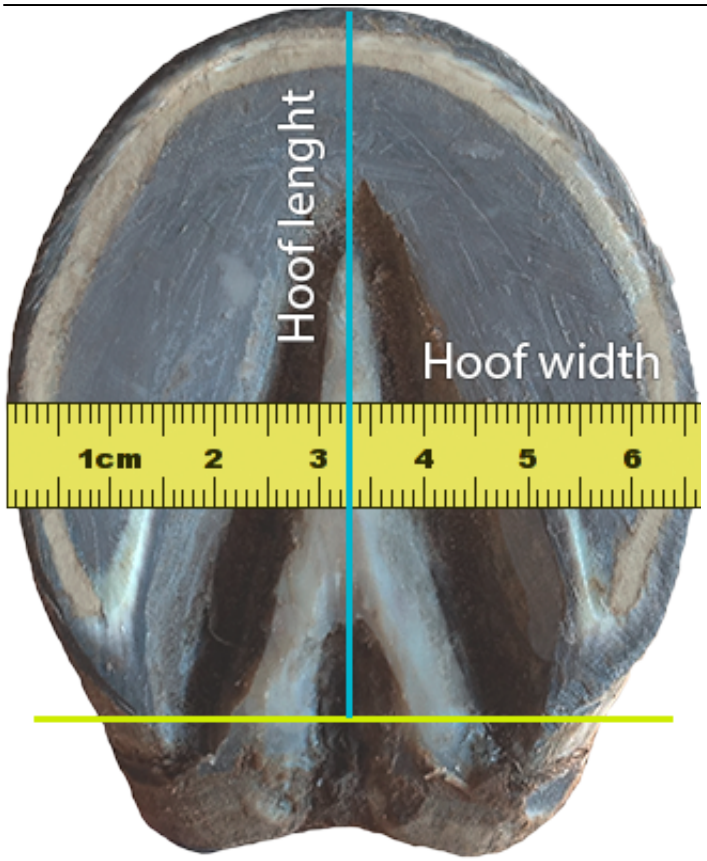


Pomiar długości kopyt

Jest to pomiar od czubka pazura do końca kątów wsporowych. Aby poprawnie wykonać ten pomiar, należy zlokalizować oba kąty wsporowe, czyli tam, gdzie kończy się ściana kopyta, narysować między nimi wyimaginowaną linię prostą i wykonać pomiar od tej linii do czubka kopyta przechodzącego przez środek strzałki.

Pamiętaj, że długość kopyt nie obejmuje piętek, ponieważ będą one zawarte w pięcie buta, a nie w podeszwie.

Używanie prostej linijki lub tarnika do zaznaczenia linii łączącej obie przypory pięty może pomóc w pomiarze długości kopyt.

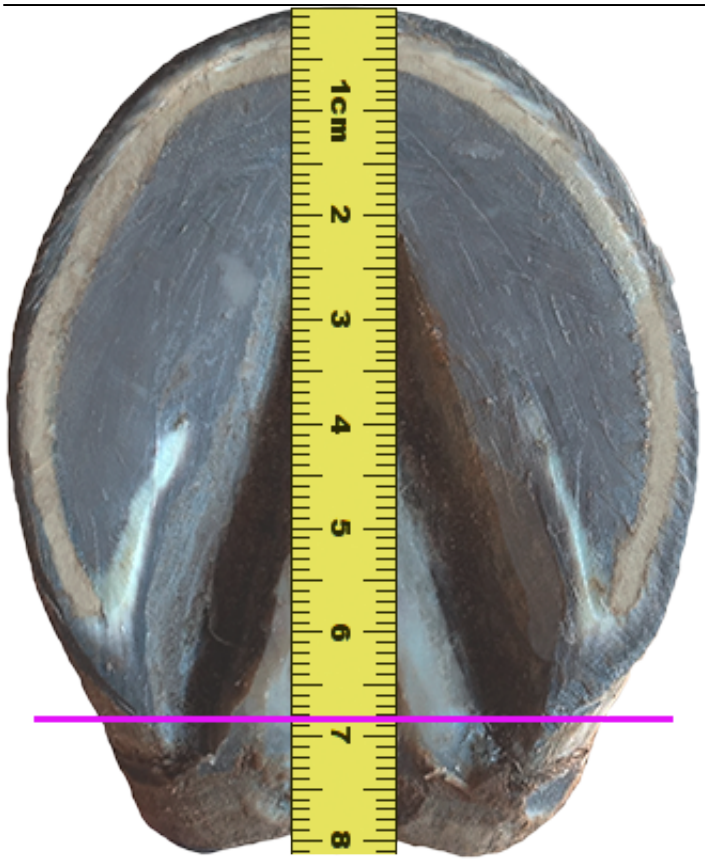

Przypadki specjalne; kopyta z niezrównoważonymi piętami
Możliwe, że rysując linię między dwoma przyporami pięty, stwierdzisz, że linia ta nie jest prosta, ale ukośna, co oznacza, że pięty są niezrównoważone. W takim przypadku również zmierz odległość od palca do najdalszej przypory pięty, ale wskazane jest skonsultowanie się z podiatrą, aby można było je odpowiednio zrównoważyć.