Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 17:05

Link do produktu: https://konwbutach.com.pl/podkowy-buty-moreaid-spider-shoe-glue-1-para-p-226.html



Podkowy/ buty MoreAid Spider Shoe Glue - 1 para

Cena brutto	**365,00 zł**
Cena netto	**296,75 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**

Opis produktu

Podkowy/ buty MoreAid Spider Shoe Glue - 1 para

MoreAid Spider Glue Shoe (Spider Bar) – podkowa klejona kompozytowa

Lekka, 3D-drukowana podkowa klejona MoreAid Spider to rozwiązanie łączące wsparcie terapeutyczne z możliwością użytkowania sportowego. Została zaprojektowana z myślą o koniach, które potrzebują ochrony podeszwy, równomiernego rozłożenia obciążenia oraz stabilizacji tylnej części kopyta – bez użycia gwoździ.

Dla jakich koni sprawdzi się najlepiej?

- Konie z cienką podeszwą, słabymi piętami lub obniżoną jakością rogu
- Konie w trakcie rehabilitacji po ochwacie (często jako kolejny etap po Squish Pads)
- Konie z problemami równowagi mediolateralnej i nierównomiernym obciążeniem kopyta
- Konie wracające do pracy po urazach i patologach kopyta
- Konie sportowe (skoki, ujeżdżenie, WKKW), którym zależy na lekkiej, amortyzującej ochronie

Najważniejsze zalety:

- Konstrukcja Spider Bar zapewnia kontrolowane wsparcie piętek i środkowej części kopyta
- Równomierne rozłożenie obciążenia i ochrona podeszwy
- Lekka, amortyzująca budowa – zmniejsza wstrząsy przenoszone na kopyto
- Brak gwoździ – bezpieczne rozwiązanie przy słabej ścianie i wrażliwych kopytach
- Możliwość zastosowania materiału impresyjnego (np. Squish DIM) dla dodatkowego wsparcia i uszczelnienia
- Możliwość wykonania otworów pod studsy (na zamówienie)

Podkowa Spider sprawdziła się zarówno w codziennej pracy rehabilitacyjnej, jak i w sporcie wyczynowym – była używana m.in. na Igrzyskach Olimpijskich
w Paryżu 2024.

Uwaga:
Podkowa wymaga profesjonalnego przyklejenia odpowiednim klejem (np. MoreAid 3D Low Odour). W przypadku pytań o dobór rozmiaru lub zastosowanie w konkretnym przypadku – napisz do nas. Chętnie pomożemy.

Jak dobrać rozmiar podkowy MoreAid Spider Glue Shoe?

Dobór właściwego rozmiaru jest kluczowy dla komfortu konia i trwałości klejenia. Producent zaleca prostą zasadę:

Mierz najszersze miejsce kopyta.

Jak prawidłowo wykonać pomiar?

1. Kopyto powinno być świeżo obcięte (najlepiej po korekcji wykonanej przez farriera).
2. Zmierz **najszersze miejsce** kopyta – zwykle jest to okolica w połowie długości ściany lub nieco bliżej tyłu.

3. Użyj suwmiarki lub precyzyjnej miarki (dokładność do 1–2 mm).
4. Zmierz każde kopyto osobno – przody i tyły często różnią się rozmiarem.

Na co zwrócić uwagę?

- **Kopyto o prawidłowym kształcie** – wybierz rozmiar odpowiadający dokładnemu pomiarowi szerokości.
- **Kopyto szersze lub bardziej płaskie** – czasem lepiej wybrać rozmiar nieco większy.
- **Kopyto wąskie lub ściśnięte** – trzymaj się dokładnego pomiaru lub skonsultuj dobór.
- **Po Squish Padach** – najczęściej przechodzi się na Spider w podobnym lub nieco większym rozmiarze.

Ważne wskazówki

Podkowy Spider są klejone, dlatego nie muszą wystawać poza obrys kopyta jak tradycyjne podkowy.
Zbyt mała podkowa może powodować nacisk i problemy z klejeniem, a zbyt duża będzie niepotrzebnie wystawać i szybciej się zużywać.

Jak dobrać rozmiar podkowy MoreAid Spider Glue Shoe?

Podstawą doboru jest pomiar **najszerszego miejsca kopyta**.

Tabela rozmiarów MoreAid Spider

Rozmiar	Szerokość (mm)	Długość (mm)
F3x0	110,0	117,9
F3x0.5	116,9	125,3
F00	124,1	133,1
F00.5	128,6	137,8
F0	131,7	141,6
F0.5	135,2	145,3
F1	139,0	149,0
F1.5	146,0	156,5
F2	153,0	164,0
F2.5	160,5	172,1
F3	177,2	189,9

Nie jesteś pewien rozmiaru?
Prześlij nam zdjęcia kopyt (od spodu i z boku) wraz z pomiarem szerokości – chętnie pomożemy w doborze odpowiedniego rozmiaru.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 0 , 0.5 , 1 , 1.5 , 2 , 2.5 , 2x0 , 2x0.5 , 3 , 3x0 , 3x0.5

Jak prawidłowo mierzyć kopyta


Wykonywanie pomiarów
Prawidłowy pomiar kopyt konia jest jednym z najważniejszych kroków, które należy podjąć, aby uzyskać dobre dopasowanie i optymalną wydajność. Z pewnością nikt z nas nie biegałby w butach za dużych lub za małych, więc nie oczekuj, że zrobią to nasze konie !!

Poniżej wyjaśniamy krok po kroku, jak wykonać wymagane pomiary:

Pamiętaj, że aby dokonać prawidłowego pomiaru, musisz to zrobić na kopycie niepodkutym i po jego ostatnim naturalnym cięciu. Kopyto powinno mieć co najmniej wyważone pięty i dobre mustang roll.

Do prawidłowego pomiaru potrzebujesz tylko sztywnej taśmy mierniczej, która mierzy w mm i czyste kopyto.

Referencje do wykonania pomiarów
Odnośniki, które należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu prawidłowych pomiarów kopyt:

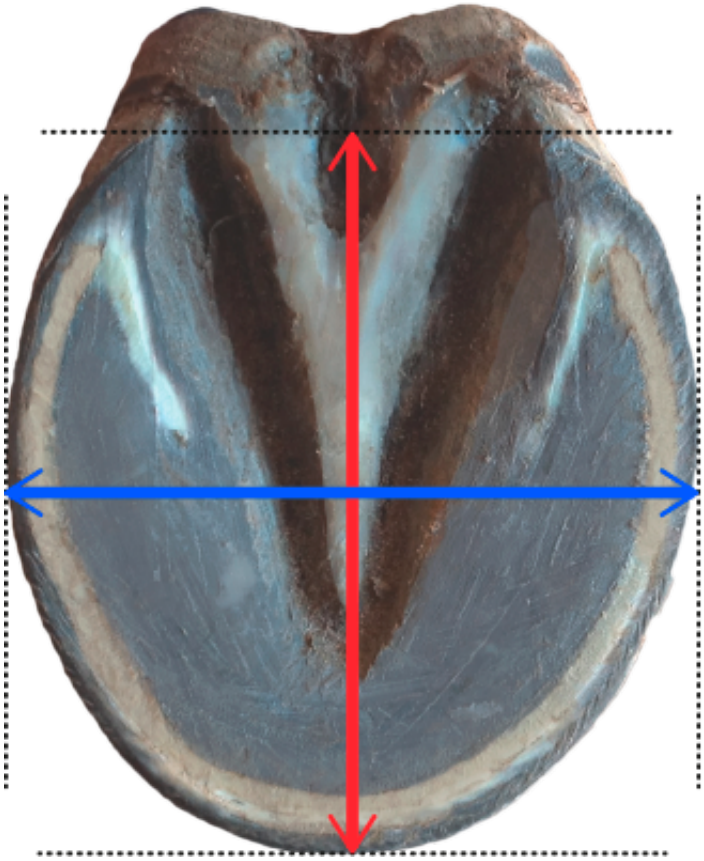


Szerokość:
niebieska linia (maksymalna szerokość kopyta).
Długość:
czerwona linia (odległość między podporą pięty a palcem).

Pomiar szerokości kopyt
Aby dokonać prawidłowego pomiaru, zmierz kopyto w najszerszym miejscu.

Pamiętaj, że maksymalna szerokość nie zawsze będzie w tym samym miejscu we wszystkich kopytach, ponieważ zależy to od konkretnego kształtu kopyt.

Pamiętaj, aby umieścić taśmę mierniczą tak prosto, jak to możliwe, z jednej strony na drugą, ponieważ ukośne położenie taśmy spowoduje nieprawidłowe pomiary.

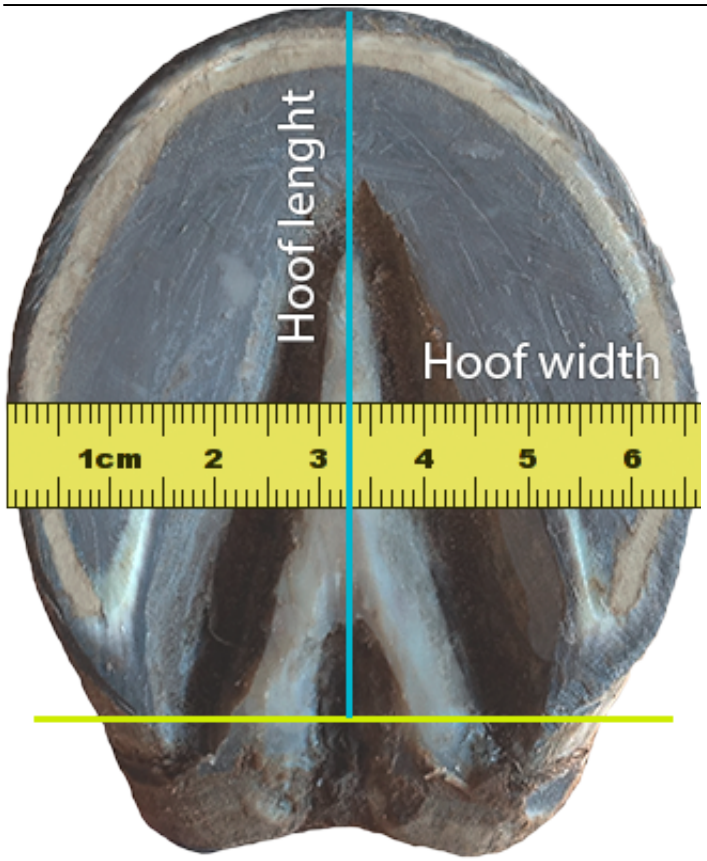


Pomiar długości kopyt

Jest to pomiar od czubka pazura do końca kątów wsporowych. Aby poprawnie wykonać ten pomiar, należy zlokalizować oba kąty wsporowe, czyli tam, gdzie kończy się ściana kopyta, narysować między nimi wyimaginowaną linię prostą i wykonać pomiar od tej linii do czubka kopyta przechodzącego przez środek strzałki.

Pamiętaj, że długość kopyt nie obejmuje piętek, ponieważ będą one zawarte w pięcie buta, a nie w podeszwie.

Używanie prostej linijki lub tarnika do zaznaczenia linii łączącej obie przypory pięty może pomóc w pomiarze długości kopyt.

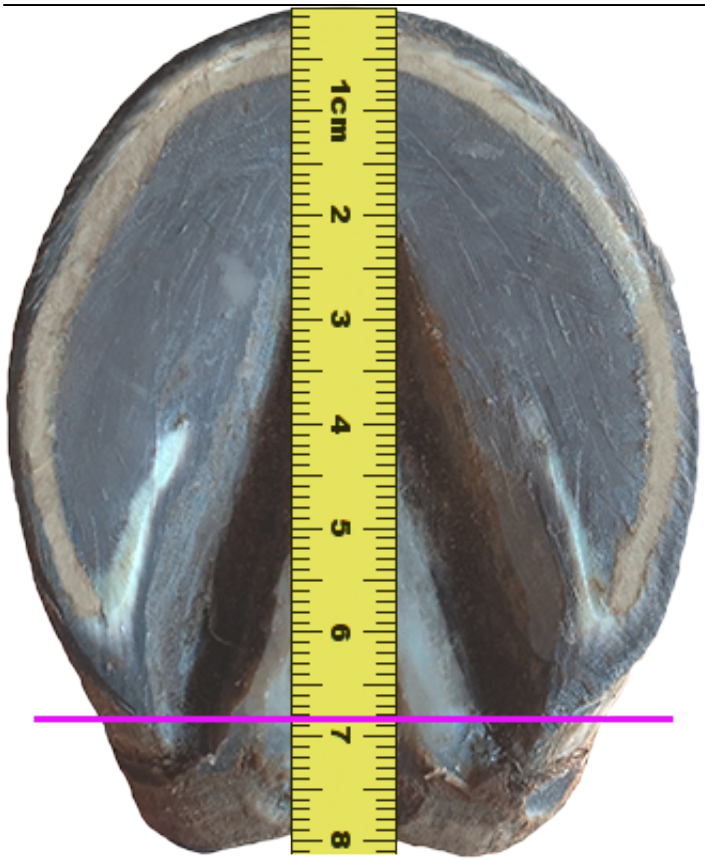

Przypadki specjalne; kopyta z niezrównoważonymi piętami
Możliwe, że rysując linię między dwoma przyporami pięty, stwierdzisz, że linia ta nie jest prosta, ale ukośna, co oznacza, że pięty są niezrównoważone. W takim przypadku również zmierz odległość od palca do najdalszej przypory pięty, ale wskazane jest skonsultowanie się z podiatrą, aby można było je odpowiednio zrównoważyć.

Zastosowania i zalety Spider Shoe Glue - przykłady


W ciągu zaledwie 5 tygodni stosowanie MoreAid Spider Bar spowodowało zwiększenie powierzchni nośnej kopyta bez zniekształceń i przyczyniło się do powstania bardziej wspierającej struktury piętki bez pogorszenia nowo wytworzonego, mocniejszego połączenia ze ścianą kopyta.


Modern Glue On
Composite Shoe Solutions
MoreAid
More Performance
MoreAid Spider Bar, in action with Danielle Hardwick & MFS Love Actually Wins