Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 17:15

Link do produktu: https://konwbutach.com.pl/podkowy-freedom-glue-1-para-p-86.html

Podkowy Freedom Glue - 1 para



Cena brutto	**314,00 zł**
Cena netto	**255,28 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**

Opis produktu

Freedom Glue – terapeutyczna podkowa klejona EDSS - 1 para

Freedom Glue to poliuretanowa wersja podkowy Freedom Shoe™, zaprojektowana przez **Gene'a Ovnicka** – założyciela EDSS (Equine Digit Support System). To podkowa jednocześnie terapeutyczna i sportowa: wspiera całe kopyto, a jednocześnie ma kontrolowane punkty odciążenia, które zmniejszają dźwignię działającą na struktury wewnętrzne.

Wykonana jest z lekkiego, dwugęstościowego poliuretanu. Miękkość i sztywność zostały tak dobrane, aby mechanika podkowy utrzymywała się przez cały cykl korekcji. Wersja Glue ma zintegrowane mankiety z trzema zakładkami i wypukłymi dystansami, które ułatwiają równomierne rozprowadzenie kleju.

Gene Ovnicek i EDSS

Gene Ovnicek to jeden z prekursorów współczesnej podiatrii koni. Od ponad 50 lat pracuje jako kowal, klinicysta i badacz. W latach 1986–1987 badał kształt i funkcję kopyt koni dzikich, a wnioski z tych obserwacji stały się podstawą koncepcji Natural Balance®.

W 1995 roku założył firmę EDSS, której celem było nie tylko podkucie, ale przywracanie mechaniki kopyta i zapobieganie kulawiznom. Współpracował m.in. z dr. Robertem Bowkerem z Michigan State University oraz Equine Lameness Prevention Organization. Freedom Shoe jest kolejnym etapem tej pracy: łączy wsparcie palca, ochronę podeszwy i redukcję dźwigni w jednej, przemyślanej podkowie.

Dla jakich koni sprawdzi się najlepiej?

- Konie z uszkodzeniami więzadeł pobocznych
- Konie z dolegliwościami stawu kopytowego
- Konie z bólem więzadła impar lub DDFT
- Konie z zespołem trzeszczkowym / navicular
- Konie z ring bone
- Konie sportowe, u których potrzebne jest wsparcie i płynniejsze przetoczenie
- Konie, u których lepiej unikać gwoździ albo ściana kopyta jest słabsza

Najważniejsze zalety:

- Dwugęstościowy poliuretan – lekkość i trwała mechanika
- Mankiety klejące z 3 zakładkami i dystansami
- Sfazowane pięty – miękkie lądowanie i płynne przetoczenie
- Wyprofilowana strona kopytowa – luz dla podeszwy przy wsparciu kości kopytowej i struktur tyłu kopyta
- Kontrolowane punkty odciążenia – mniejsza dźwignia na struktury wewnętrzne
- Możliwość drobnej korekty szlifierką
- Klejenie klejem akrylowym lub uretanowym
- Sprzedawana w parach

Freedom Glue a Freedom Aluminum:
Wersja plastikowa jest lżejsza i dobrze sprawdza się w większości przypadków. Producent zaznacza jednak, że poliuretan z czasem może się minimalnie odkształcić. Jeśli koń ma płaską lub wypadającą podeszwę i kontakt z podłożem jest niedopuszczalny, bezpieczniejszym wyborem jest aluminiowa wersja Freedom.

Zalecany klej:
klej akrylowy lub uretanowy.
Często stosuje się też materiał wyciskowy / packing w podeszwie przed aplikacją.

Jak dobrać rozmiar Freedom Glue?

Rozmiar dobiera się według **szerokości kopyta**.
Mankiety klejące zajmują dodatkową przestrzeń, dlatego pomiar musi być dokładny. Niektóre źródła zalecają w wersji Glue wzięcie rozmiaru o jeden większego niż sama szerokość kopyta.

Pomiary wykonuj na świeżo obciętym kopycie.

Tabela rozmiarów

Rozmiar	Szerokość kopyta (mm)	Szerokość podkowy (mm)	Długość podkowy (mm)
0000	101,6	108,0	114,3
000	108,0	114,3	120,7
00	114,3	120,7	127,0
0	120,7	127,0	133,4
1	127,0	133,4	139,7
2	133,4	139,7	146,1
3	139,7	146,1	152,4
4	146,1	152,4	158,8
5	152,4	158,8	165,1

Wskazówki:

- Mierz szerokość w najszerszym miejscu kopyta.
- W razie wątpliwości między dwoma rozmiarami – w wersji Glue bezpieczniej wziąć większy.
- Drobne dopasowanie można wykonać szlifierką.
- Dobór podkowy terapeutycznej najlepiej skonsultować z kowalem i lekarzem weterynarii.
- W razie potrzeby prześlij nam zdjęcia kopyt wraz z pomiarami.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 0 , 1 , 2 , 2x0 , 3 , 3x0 , 4 , 4x0

Jak prawidłowo mierzyć kopyta


Wykonywanie pomiarów
Prawidłowy pomiar kopyt konia jest jednym z najważniejszych kroków, które należy podjąć, aby uzyskać dobre dopasowanie i optymalną wydajność. Z pewnością nikt z nas nie biegałby w butach za dużych lub za małych, więc nie oczekuj, że zrobią to nasze konie !!

Poniżej wyjaśniamy krok po kroku, jak wykonać wymagane pomiary:

Pamiętaj, że aby dokonać prawidłowego pomiaru, musisz to zrobić na kopycie niepodkutym i po jego ostatnim naturalnym cięciu. Kopyto powinno mieć co najmniej wyważone pięty i dobre mustang roll.

Do prawidłowego pomiaru potrzebujesz tylko sztywnej taśmy mierniczej, która mierzy w mm i czyste kopyto.

Referencje do wykonania pomiarów
Odnośniki, które należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu prawidłowych pomiarów kopyt:

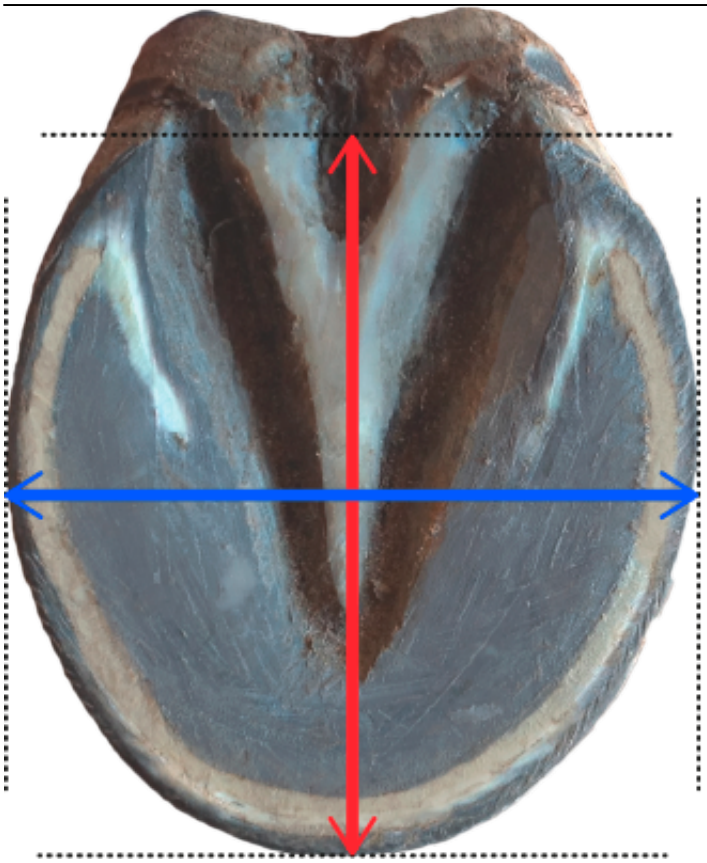


Szerokość:
niebieska linia (maksymalna szerokość kopyta).
Długość:
czerwona linia (odległość między podporą pięty a palcem).

Pomiar szerokości kopyt
Aby dokonać prawidłowego pomiaru, zmierz kopyto w najszerszym miejscu.

Pamiętaj, że maksymalna szerokość nie zawsze będzie w tym samym miejscu we wszystkich kopytach, ponieważ zależy to od konkretnego kształtu kopyt.

Pamiętaj, aby umieścić taśmę mierniczą tak prosto, jak to możliwe, z jednej strony na drugą, ponieważ ukośne położenie taśmy spowoduje nieprawidłowe pomiary.

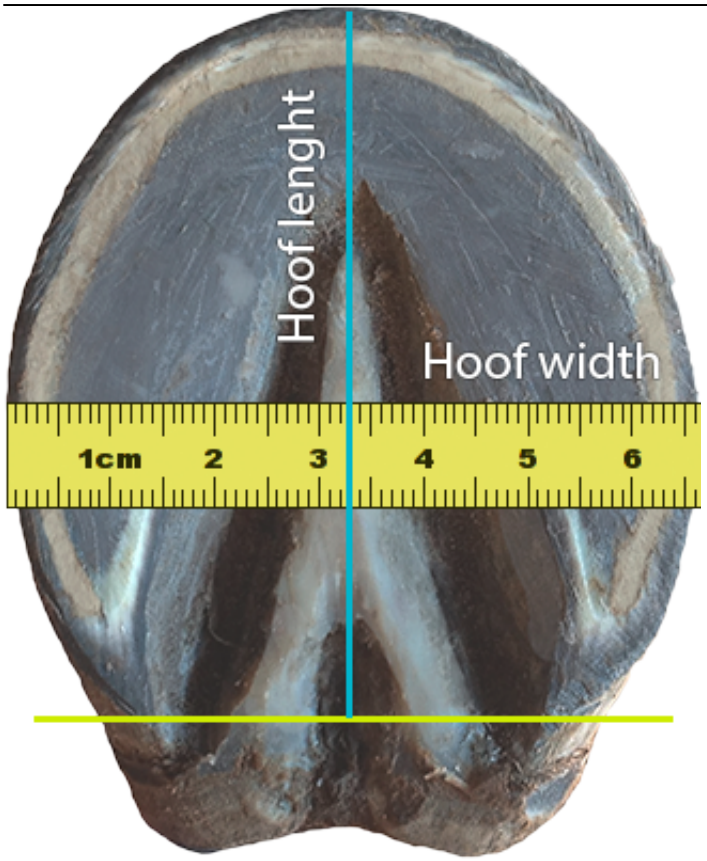


Pomiar długości kopyt

Jest to pomiar od czubka pazura do końca kątów wsporowych. Aby poprawnie wykonać ten pomiar, należy zlokalizować oba kąty wsporowe, czyli tam, gdzie kończy się ściana kopyta, narysować między nimi wyimaginowaną linię prostą i wykonać pomiar od tej linii do czubka kopyta przechodzącego przez środek strzałki.

Pamiętaj, że długość kopyt nie obejmuje piętek, ponieważ będą one zawarte w pięcie buta, a nie w podeszwie.

Używanie prostej linijki lub tarnika do zaznaczenia linii łączącej obie przypory pięty może pomóc w pomiarze długości kopyt.

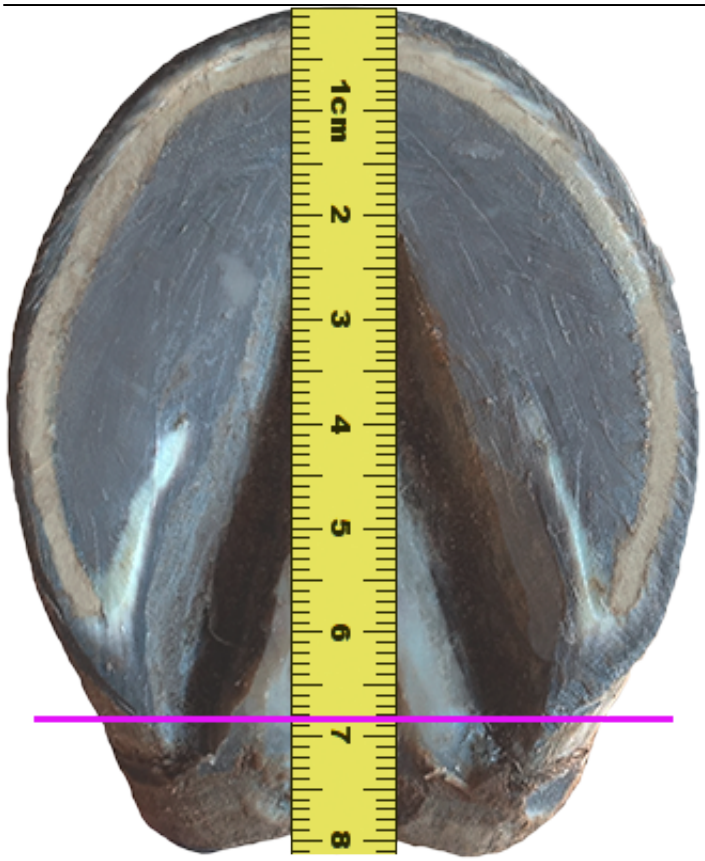

Przypadki specjalne; kopyta z niezrównoważonymi piętami
Możliwe, że rysując linię między dwoma przyporami pięty, stwierdzisz, że linia ta nie jest prosta, ale ukośna, co oznacza, że pięty są niezrównoważone. W takim przypadku również zmierz odległość od palca do najdalszej przypory pięty, ale wskazane jest skonsultowanie się z podiatrą, aby można było je odpowiednio zrównoważyć.

Aplikacja podków Freedom Glue