
Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 17:15

Link do produktu: https://konwbutach.com.pl/zestaw-haczykow-mocowan-do-podkow-kompozytowych-za-pomoca-tasmy-hoofcast-p-211.html

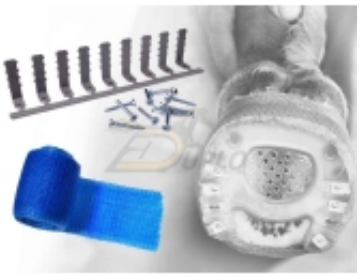

Zestaw haczyków - mocowań do podków kompozytowych za pomocą taśmy hoofcast

Cena brutto	**65,00 zł**
Cena netto	**52,85 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**

Opis produktu

Zestaw haczyków - mocowań do podków kompozytowych za pomocą taśmy hoofcast

Hoofcast – unieruchomienie i ochrona chorego i/lub uszkodzonego kopyta

Naszym długoterminowym celem jest posiadanie w ofercie odpowiedniej podkowy dla każdego konia i zastosowania.
Zdrowe i stabilne kopyto jest kluczowe dla dobrego samopoczucia i wydajności konia. Czasami jednak może się zdarzyć, że kopyto będzie miało urazy, ropnie lub inne problemy wymagające specjalistycznego leczenia.
Dziedzina podkuwania terapeutycznego jest bardzo wszechstronna; często potrzebne są zindywidualizowane rozwiązania. Zastosowanie taśmy gipsowej w podkuwaniu koni zapewnia elastyczność i możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb. Może być stosowana jako tymczasowa ochrona i wsparcie lub jako element bardziej kompleksowego leczenia kopyt. Założenie podkowy gipsowej wymaga odpowiedniej wiedzy specjalistycznej. Trudno jest sformułować ogólne stwierdzenia dotyczące dokładnego momentu zastosowania gipsu na kopycie. Ogólnie rzecz biorąc, można jednak stwierdzić, że gips na kopycie może być przydatny, jeśli torebka rogowa powinna być całkowicie unieruchomiona, a do zamocowania zabezpieczenia kopyta nie można użyć gwoździ.
Ostateczną decyzję o zastosowaniu odlewu kopyta powinien zawsze podejmować wykwalifikowany kowal na miejscu, ewentualnie we współpracy z lekarzem weterynarii.
Wybierając ochronny i unieruchamiający gips na kopyto, nasze haki gipsowe wraz z kompozytową podkową i odpowiednią taśmą gipsową mogą okazać się dobrym wyborem.

Odlew kopyta — podkowa odlewnicza łącząca haki odlewnicze i taśmę odlewniczą — zdjęcia

Haki odlewane umożliwiają przymocowanie podkowy kompozytowej do kopyta za pomocą taśmy odlewniczej.

Aby przymocować odlewane haki do podkowy, potrzebne są odpowiednie śruby.

Przygotowana podkowa kompozytowa do odlewu kopyta za pomocą naszego systemu odlewniczego.

Odlew podkowy zakładano na kopyto przed owinięciem go taśmą odlewniczą.

Do założenia podkowy gipsowej potrzebna jest taśma gipsowa z włókna szklanego, którą owinąć wokół kopyta nad haczykami gipsowymi.

Gotowa odlewana podkowa na kopytach konia. Upewnij się, że korona i pęciny piętowe pozostają odsłonięte.

Instrukcja stosowania i bezpieczeństwa odlewanej podkowy

Nasze produkty nie są przeznaczone do diagnozowania ani leczenia chorób. Jednakże podkowa gipsowa może być stosowana jako środek wspomagający. Ważne jest, aby doświadczony specjalista nadzorował jej aplikację i dokonywał niezbędnych korekt, aby zapewnić kopytu odpowiednią ochronę i wsparcie.
Prosimy o zapoznanie się z naszymi Instrukcjami Bezpieczeństwa dotyczącymi wszelkich prac z naszymi produktami, skierowanymi zarówno do kowala, jak i właściciela konia. Podczas pracy z haczykami odlewanymi należy pamiętać o ryzyku skaleczenia się małymi kolcami, dlatego zalecamy noszenie rękawic ochronnych. Podczas pracy z taśmą odlewniczą (odlew z włókna szklanego syntetycznego) należy zapoznać się z instrukcją użytkowania producenta.

Bandaż na kopyto z taśmą odlewniczą

Taśma gipsowa (opatrunek gipsowy lub bandaż) to syntetyczny bandaż podtrzymujący wykonany z włókna szklanego impregnowanego żywicą poliuretanową. Po zetknięciu z wodą żywica twardnieje w krótkim czasie. Bandaż gipsowy wyróżnia się wysoką elastycznością, dzięki czemu łatwo go owinąć wokół kopyta. Jego miękki materiał pozwala na łatwe dopasowanie do kształtu kopyta. Rezultatem jest sztywny, niezwykle stabilny, a jednocześnie lekki bandaż podtrzymujący. Taśma gipsowa charakteryzuje się dobrą przeziernością dla promieni rentgenowskich, co pozwala na monitorowanie procesu gojenia bez konieczności częstej zmiany opatrunku.

W praktyce może się zdarzyć, że potrzebne będą oba – bandaż na kopyto i podkowa.
Do tego celu można użyć taśmy gipsowej.

- stworzyć opatrunek na kopyto w przypadku jego urazu.
- Zabezpiecz podeszwę kompozytową w połączeniu z naszymi haczykami odlewanymi. Haczyki odlewane posiadają małe metalowe kolce, które mocno wbijają się w materiał taśmy odlewniczej, zapewniając bezpieczne trzymanie.
- na przykład załóż na kopyto stalową podkowę, przybijając ją do taśmy odlewniczej.

W większości przypadków but gipsowy stosuje się w celach terapeutycznych.
Taśma odlewnicza twardnieje pod wpływem wody. Dlatego należy uważać, aby nie uszkodzić opakowania – po wystawieniu taśmy na działanie powietrza może ona stwardnieć pod wpływem wilgoci.

Odlewana podkowa

Do wykonania odlewu kopyta przy użyciu naszego systemu odlewniczego potrzebne będą:

- Kompozytowa podkowa dopasowana do indywidualnej sytuacji kopyta konia. Każdy z naszych modeli z wytrzymałym metalowym rdzeniem nadaje się do stosowania jako podkowa odlewana z naszymi haczykami odlewanymi.
- Wymagana liczba haczyków odlewanych. Pasek odlewany składa się z 9 haczyków odlewanych. Zazwyczaj potrzeba 6 haczyków odlewanych na podkowę.
-

Jak prawidłowo mierzyć kopyta


Wykonywanie pomiarów
Prawidłowy pomiar kopyt konia jest jednym z najważniejszych kroków, które należy podjąć, aby uzyskać dobre dopasowanie i optymalną wydajność. Z pewnością nikt z nas nie biegałby w butach za dużych lub za małych, więc nie oczekuj, że zrobią to nasze konie !!

Poniżej wyjaśniamy krok po kroku, jak wykonać wymagane pomiary:

Pamiętaj, że aby dokonać prawidłowego pomiaru, musisz to zrobić na kopycie niepodkutym i po jego ostatnim naturalnym cięciu. Kopyto powinno mieć co najmniej wyważone pięty i dobre mustang roll.

Do prawidłowego pomiaru potrzebujesz tylko sztywnej taśmy mierniczej, która mierzy w mm i czyste kopyto.

Referencje do wykonania pomiarów
Odnośniki, które należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu prawidłowych pomiarów kopyt:

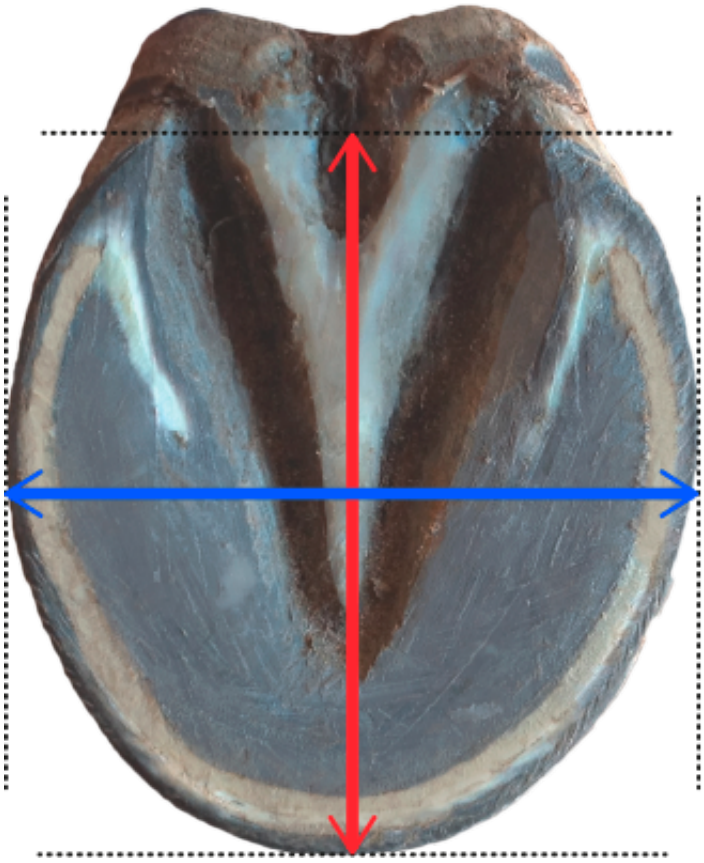


Szerokość:
niebieska linia (maksymalna szerokość kopyta).
Długość:
czerwona linia (odległość między podporą pięty a palcem).

Pomiar szerokości kopyt
Aby dokonać prawidłowego pomiaru, zmierz kopyto w najszerszym miejscu.

Pamiętaj, że maksymalna szerokość nie zawsze będzie w tym samym miejscu we wszystkich kopytach, ponieważ zależy to od konkretnego kształtu kopyt.

Pamiętaj, aby umieścić taśmę mierniczą tak prosto, jak to możliwe, z jednej strony na drugą, ponieważ ukośne położenie taśmy spowoduje nieprawidłowe pomiary.

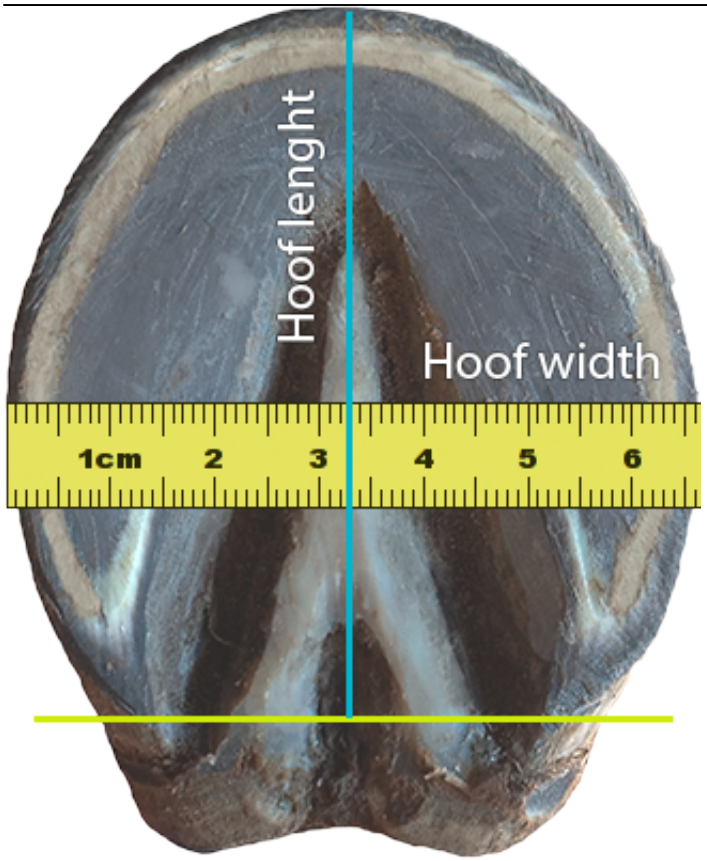


Pomiar długości kopyt

Jest to pomiar od czubka pazura do końca kątów wsporowych. Aby poprawnie wykonać ten pomiar, należy zlokalizować oba kąty wsporowe, czyli tam, gdzie kończy się ściana kopyta, narysować między nimi wyimaginowaną linię prostą i wykonać pomiar od tej linii do czubka kopyta przechodzącego przez środek strzałki.

Pamiętaj, że długość kopyt nie obejmuje piętek, ponieważ będą one zawarte w pięcie buta, a nie w podeszwie.

Używanie prostej linijki lub tarnika do zaznaczenia linii łączącej obie przypory pięty może pomóc w pomiarze długości kopyt.

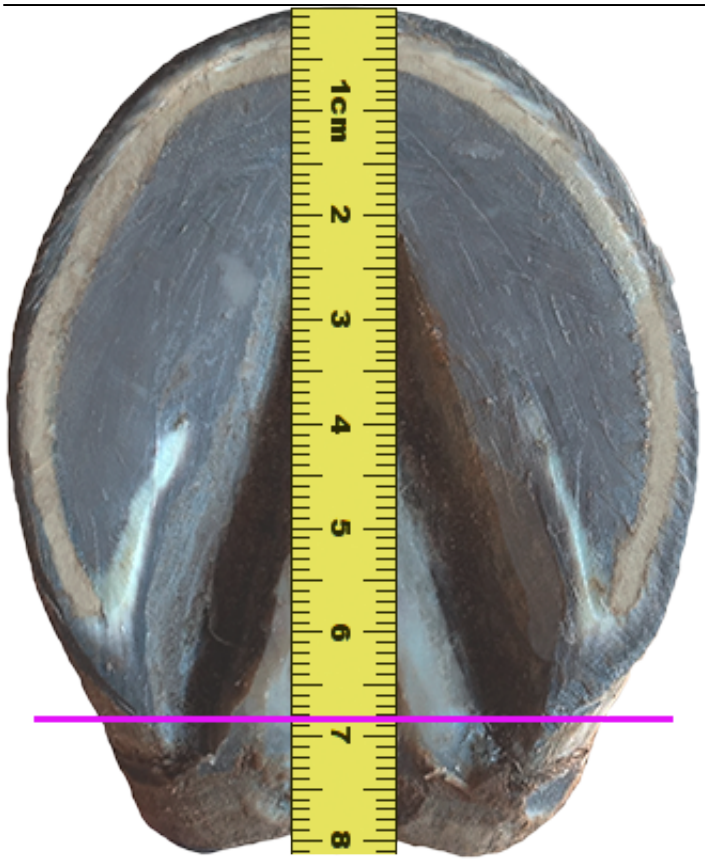

Przypadki specjalne; kopyta z niezrównoważonymi piętami
Możliwe, że rysując linię między dwoma przyporami pięty, stwierdzisz, że linia ta nie jest prosta, ale ukośna, co oznacza, że pięty są niezrównoważone. W takim przypadku również zmierz odległość od palca do najdalszej przypory pięty, ale wskazane jest skonsultowanie się z podiatrą, aby można było je odpowiednio zrównoważyć.

Zakładanie podkowy z użyciem haczyków i hoofcast